



# Certum Multi-Drug Rapid Test Panel (Orina)

## Ficha Técnica

Instrucciones para realizar el test de cualquier combinación de las siguientes drogas:  
ACE/AMP/BAR/BZO/BUP/COC/THC/MTD/MET/MDMA/MOP/MQL/OPI/PCP/PPX/TCA/  
TML/KET/OXY/COT/EDDP/FYL/K2/6-MAM/MDA/ETG/CLO/LSD/MPD/ZOL/MEP/MDPV/  
DIA/ZOP/MCAT/7-ACL/CAF/CFYL/CAT/T/RO/ALP/PGB/ZAL/MPRD/CNB/GAB/TZD/CAR/  
ABP(K3)/QTP/FLX/UR-144(K4)/KRA/TLD/α-PVP/MES/PAP/CIT/FKET/OZP/RPD/TAP/  
NND/SCOP/MTZ/HMO/ALC

Incluye controles de validez de la muestra:

(Oxidantes, Densidad, pH, Nitritos, Glutaraldehído, Creatinina y Lejía)

Un test rápido para la detección cualitativa simultánea de multidrogas y sus metabolitos en orina humana. Inmunoensayo sólo para diagnóstico in vitro y utilizado por profesionales de la salud.

### 【USO PREVISTO Y RESUMEN】

El Test Rápido de Multidrogas en Panel es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de drogas múltiples y sus metabolitos en orina a las siguientes concentraciones del cut-off:

| Test                                                  | Calibrador                                     | Cut-off (ng/mL)         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Acetaminofena (ACE)                                   | Acetaminofena                                  | 5,000                   |
| Anfetamina (AMP)                                      | d-Anfetamina                                   | 1,000/500/300           |
| Barbitúricos (BAR)                                    | Secobarbital                                   | 300/200                 |
| Benzodiazepinas (BZO)                                 | Oxazepam                                       | 500/300/200/100         |
| Buprenorfina (BUP)                                    | Buprenorfina                                   | 10/5                    |
| Cocaine (COC)                                         | Benzoilecgonina                                | 1,500/300/200/150/100   |
| MARIHUANA (THC)                                       | 11-nor-Δ <sup>9</sup> -THC-9 COOH              | 300/200/150/50/30/25/20 |
| Metadona (MTD)                                        | Metadona                                       | 300/200                 |
| Metanfetamina (MET)                                   | d-Metanfetamina                                | 1,000/500/300/200       |
| Metilendioximetanfetamina (MDMA)                      | d,l-metilendioxi-metanfetamina                 | 1,000/500/300           |
| Morfina (MOP/OPI)                                     | Morfina                                        | 300/200/100             |
| Metacualona (MQL)                                     | Metacualona                                    | 300                     |
| Opiáceo(OPI)                                          | Morfina                                        | 2,000/1,000/500         |
| Fenciclidina (PCP)                                    | Fenciclidina                                   | 25/50                   |
| Propoxifeno (PPX)                                     | Propoxifeno                                    | 300                     |
| Antidepresivos tricíclicos (TCA)                      | Nortriptilina                                  | 1,000/500/300           |
| Tramadol (TML)                                        | Cis-Tramadol                                   | 500/300/200/100         |
| Ketamina (KET)                                        | Ketamina                                       | 1,000/500/300/100       |
| Oxicodona (OXY)                                       | Oxicodona                                      | 300/100                 |
| Cotinina (COT)                                        | Cotinina                                       | 500/300/200/100/50/10   |
| 2-etilideno-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina (EDDP) | 2-etilideno-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina | 300/100                 |
| Fentanilo (FYL)                                       | Norfentanilo                                   | 20/10                   |
| Fentanilo (FYL)                                       | Fentanilo                                      | 300/200/100             |
| MARIHUANA Sintética (K2)                              | JWH-018, JWH-073                               | 50/30/25                |
| 6-mono-vinagre-morfina (6-MAM)                        | 6-mono-vinagre-morfina                         | 10                      |
| (±) 3,4-Metilendioxi-Anfetamina (MDA)                 | (±)3,4-Metilendioxi-Anfetamina                 | 500                     |
| Etil-β-D-Glucurónido (ETG)                            | Etil-β-D-Glucurónido                           | 1,500/1,000/500/300     |
| Clonazepam (CLO)                                      | Clonazepam                                     | 400/150                 |
| Dietilamida del ácido lisérgico (LSD)                 | Dietilamida del ácido lisérgico                | 50/20/10                |
| Metilfenidato (MPD)                                   | Metilfenidato                                  | 300/150                 |
| Metilfenidato (MPD)                                   | Ácido Ritalín                                  | 1,000                   |
| Zolpidem (ZOL)                                        | Zolpidem                                       | 50/25                   |
| Diazepam (DIA)                                        | Diazepam                                       | 300/200                 |
| Zopiclone (ZOP)                                       | Zopiclone                                      | 300/50                  |
| Metcatinona (MCAT)                                    | S(-)-Metcatinona                               | 500                     |
| 7-Aminoclonazepam (7-ACL)                             | 7-Aminoclonazepam                              | 300/200/100             |
| Carfentanilo (CFYL)                                   | Carfentanilo                                   | 500/250                 |
| Cafeína (CAF)                                         | Cafeína                                        | 1,000                   |
| Cathine (CAT)                                         | (+)-Norpseudoefedrina                          | 150                     |
| Tropicamida (TRO)                                     | Tropicamida                                    | 350                     |
| 3, 4-metilendioxipirovalerona (MDPV)                  | 3, 4-metilendioxipirovalerona                  | 1,000/500/300           |
| Mefedrona (MEP)                                       | Mefedrona                                      | 100/500                 |

|                                   |                           |                     |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Alprazolam (ALP)                  | Alprazolam                | 100                 |
| AB-PINACA (ABP/K3)                | AB-PINACA                 | 10                  |
| α-Pirrolidinovalerofenona (α-PVP) | α-Pirrolidinovalerofenona | 2,000/1,000/500/300 |
| Cannabino (CNB)                   | Cannabino                 | 500                 |
| Meperidina (MPRD)                 | Meperidina                | 100                 |
| Pregabalina (PGB)                 | Pregabalina               | 50,000/500          |
| Trazodona (TZD)                   | Trazodona                 | 200                 |
| UR-144/K4                         | UR-144 5-ácido pentanoico | 25                  |
| Zaleplón (ZAL)                    | Zaleplón                  | 100                 |
| Mescalina (MES)                   | Mescalina                 | 100/300             |
| Gabapentina (GAB)                 | Gabapentina               | 2,000               |
| Tilidina (TLD)                    | Nortilidina               | 50                  |
| Quetiapina (QTP)                  | Quetiapina                | 1,000               |
| Papaverina (PAP)                  | Papaverina                | 500                 |
| Kratom (KRA)                      | Mitraginina               | 300                 |
| Carisoprodol (CAR)                | Carisoprodol              | 2,000/1,000/500     |
| Fluoxetina (FLX)                  | Fluoxetina                | 500                 |
| Citalopram (CIT)                  | Citalopram                | 500                 |
| Fluoketamina (FKET)               | Fluoketamina              | 1,000               |
| Olanzapina (OZP)                  | Olanzapina                | 1,000               |
| Risperidona (RPD)                 | Risperidona               | 150                 |
| Tapentadol (TAP)                  | Tapentadol                | 1,000               |
| N,N-Dimetiltriptamina (NND)       | N,N-Dimetiltriptamina     | 1,000               |
| Escopolamina (SCOP)               | Escopolamina              | 500                 |
| Escopolamina (MTZ)                | Desmetilmirtazapina       | 500                 |
| Hydromorphone (HMO)               | Hydromorphone             | 500/300/250         |
| Test                              | Calibrador                | Cut-off             |
| Alcohol (ALC)                     | Alcohol                   | 0.02%               |

Las configuraciones del test rápido Multidrogas en Panel vienen con cualquier combinación de las drogas listadas. Este ensayo proporciona sólo resultados analíticos preliminares. Para obtener un resultado confirmatorio debe utilizarse un método químico alternativo más específico, preferentemente Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas (GC/MS). A cualquier resultado de un test de drogas de abuso debe aplicarse consideraciones clínicas y un juicio profesional, particularmente si indica un resultado preliminar positivo.

### 【RESUMEN DE LA ADULTERACIÓN】

La adulteración es la manipulación de una muestra de orina con la intención de alterar los resultados de las pruebas. El uso de adulterantes puede causar resultados falsos negativos en las pruebas de drogas por interferir con la prueba de detección de drogas y/o destruir las drogas presentes en la orina. La dilución se puede hacer también en un intento de producir resultados falsos negativos de la prueba de drogas.

Por lo anterior es importante garantizar la integridad de las muestras de orina en los test de detección de drogas.

Una de las mejores formas para detectar la adulteración o dilución es determinar ciertos parámetros/características de la orina tales como el pH, la densidad, creatinina, presencia de oxidantes/PCC, nitritos o glutaraldehído en la orina.

### 【PRINCIPIO DEL TEST (PARA LAS PRUEBAS DE DROGAS DE ABUSO, EXCLUYENDO EL ALCOHOL)】

Durante el test una muestra de orina migra hacia arriba por acción capilar. La droga, si está presente en la muestra de orina con una concentración por debajo del valor del cut-off, no saturará los puntos de unión de sus anticuerpos específicos. Los anticuerpos reaccionarán con los conjugados de las proteínas de las drogas y una línea de color visible aparecerá en la región del test de la droga específica. La presencia de la droga en concentración superior a la del cut-off saturará todos los puntos de unión del anticuerpo y por lo tanto, no se formará la línea de color en la región del test.

Una muestra de orina positiva a una droga no generará línea de color en la región específica del test debido a la competencia de la droga, mientras que una muestra de orina negativa a una droga generará una línea en la región del test debido a ausencia de competición de la droga.

Para servir como procedimiento de control, siempre aparecerá una línea de color en la región de control, lo que indica que se ha añadido un volumen apropiado de muestra y la membrana ha funcionado correctamente.

### 【PRINCIPIO DE ADULTERACIÓN】

**Oxidantes(OXI)/PCC(Clorocromato de Piridinio):** Determina en el test la presencia de agentes oxidantes tales como cloro y peróxido de hidrógeno. El Clorocromato de piridinio,es uno de los adulterantes comúnmente utilizado.<sup>2</sup> La orina humana normalmente no debería contener agentes oxidantes de PCC.

**Densidad(SG):** Determina en el test la dilución de la muestra. El rango normal es de 1.003 a 1.030. Los valores fuera de este rango pueden ser el resultado de dilución de la muestra o la

adulteración.

**pH:** Pruebas de pH se usan para detectar la presencia de adulterantes ácidos o alcalinos en la orina. Los niveles de pH normales deben estar en el rango de 4.0 a 9.0. Los valores fuera de este rango puede indicar que la muestra ha sido alterada.

**Nitrito(NIT):** Los test de nitritos se utilizan para determinar adulterantes comerciales de uso común. Su mecanismo de acción es por oxidación del principal metabolito cannabinoide THC-COOH.<sup>3</sup> La orina normal no debería contener trazas de nitrito. Los resultados positivos generalmente indican la presencia de un adulterante.

**Glutaraldehído(GLUT):** El ensayo determina la presencia de un aldehído. Algunos adulterantes contienen Glutaraldehído que puede causar resultados falsos negativos mediante la interrupción de la enzima utilizada en algunas pruebas de inmunoensayo.<sup>3</sup> El Glutaraldehído no se encuentra normalmente en la orina; por lo tanto, la detección de glutaraldehído en una muestra de orina es generalmente un indicador de adulteración.

**Creatinina(CREA):** Es un producto de desecho de la creatina, aminoácido contenido en el tejido muscular y que se encuentra en la orina.<sup>1</sup> Una persona puede intentar hacer fracasar la prueba de detección de drogas bebiendo cantidades excesivas de agua o diuréticos tales como té de hierbas para limpiar el organismo. Con la creatinina y la densidad se puede por tanto determinar la dilución y limpieza del organismo que son los mecanismos más comúnmente utilizados en un intento de eludir la prueba de drogas. Niveles bajos de creatinina y de densidad pueden indicar una orina diluida. La ausencia de creatinina (<5 mg/dL) es indicativo de una muestra que no es coherente con la orina.

**Blanqueantes/Lejía(BLE):** el test determina la presencia de blanqueantes como la lejía. Los blanqueadores son una serie de sustancias químicas que eliminan el color, blanquean o desinfectan mediante la oxidación. Los blanqueadores se utilizan como productos químicos domésticos para blanquear la ropa, eliminar manchas y como desinfectantes. La orina humana normal no debe contener lejía.

### 【PRINCIPIO (PARA EL ALCOHOL)】

La Prueba Rápida de Alcohol en orina consiste en una tira de plástico con una almohadilla de reacción en el extremo. En contacto con el alcohol, la almohadilla reactiva cambiará de color dependiendo de la concentración de alcohol presente. Esto se basa en la alta especificidad de la alcohol oxidasa del alcohol etílico en presencia de sustrato de peroxidasa y enzima tal como TMB.

### 【REACTIVOS(PARA LAS PRUEBAS DE DROGAS DE ABUSO, EXCLUYENDO EL ALCOHOL)】

Cada línea del test contiene anticuerpos monoclonales de ratón anti-droga y el correspondiente conjugado droga-proteína. La línea de control contiene anticuerpos policlonales de cabra IgG anti-conejo y conejo IgG.

### 【REACTIVOS(PARA EL ALCOHOL)】

Tetrametilbencidina, Alcohol oxidasa, Peroxidasa

### 【REACTIVOS S.V.T】

| Almohadilla de adulterantes/controles de validez de muestra | Indicador de reactivos | Buffers e ingredientes no reactivos |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Creatinina                                                  | 0.04%                  | 99.96%                              |
| Nitrito                                                     | 0.07%                  | 99.93%                              |
| Blanqueantes/Lejía                                          | 0.39%                  | 99.61%                              |
| Glutaraldehído                                              | 0.02%                  | 99.98%                              |
| pH                                                          | 0.06%                  | 99.94%                              |
| Densidad                                                    | 0.25%                  | 99.75%                              |
| Oxidantes/PCC                                               | 0.36%                  | 99.64%                              |

### 【PRECAUCIONES】

- Los profesionales de la salud incluso los profesionales en el punto de atención (POC).
- Inmunoensayo solamente para diagnóstico *in vitro*. El test en panel debe permanecer en su bolsa sellada hasta el momento de su uso.
- Todas las muestras deben considerarse como potencialmente peligrosas y manejadas de la misma manera que los agentes infecciosos.
- El test utilizado debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

### 【ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD】

Almacenar empaquetados en su bolsa sellada a 2-30°C. El test es estable hasta su fecha de caducidad impresa en la bolsa. El test en panel debe permanecer en su bolsa sellada hasta el momento de su uso. **NO CONGELAR.** No usar más allá de su fecha de caducidad.

### 【RECOGIDA DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN】

#### Ensayo en orina

La muestra de orina debe recogerse en un contenedor limpio y seco. Puede utilizarse orina recogida en cualquier momento del día. Las muestras de orina que presenten precipitados visibles deben centrifugarse, filtrarse o permitir que sedimenten para obtener una muestra clara para realizar el test.

### Almacenamiento de muestras

Las muestras de orina pueden almacenarse a 2-8°C hasta 48 horas antes de su análisis. Para almacenamiento más prolongado, las muestras pueden congelarse por debajo de -20°C. Las muestras congeladas deben descongelarse y mezclarse bien antes de su análisis. Para comparar las tarjetas con los controles de validez de muestra o Alcohol en muestras de orina, el almacenamiento de éstas no debe exceder de 2 horas a temperatura ambiente o 4 horas refrigeradas antes de la prueba.

### 【MATERIALES】

#### Materiales Proporcionados

- Panels
- Ficha Técnica
- Goteros (opcional)
- Carta de color adulteración (cuando sea aplicable)

#### Materiales Requeridos pero no Proporcionados

- Contenedor de recogida de muestras
- Temporizador

### 【INSTRUCCIONES DE USO】

Permitir que el test, muestra de orina y/o control alcancen la temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar el test.

Deje que la bolsa alcance la temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el panel de prueba de la bolsa sellada y utilícelo dentro de una hora. Realice la prueba con los dos métodos siguientes.


#### Método 1:

1. Con el pocillo de muestra apuntando hacia la muestra de orina, sumerja el panel de prueba verticalmente en la muestra de orina durante al menos **1 segundo**. Sumerja el panel al menos hasta el “nivel mínimo de orina” del pocillo de muestra, pero no por encima del “nivel máximo de orina” en el panel de prueba.
2. Coloque el panel de prueba sobre una superficie plana no absorbente.
3. Inicie el cronómetro y espere a que aparezcan las líneas de color.
4. El resultado de la tira de detección de drogas debe leerse **1 minuto**. No interprete el resultado después de 10 minutos.

#### Método 2:

1. Coloque el panel sobre una superficie limpia y nivelada. Sostenga el gotero verticalmente y transfiera **3 gotas completas de orina** a cada pocillo de muestra del panel y luego inicie el cronómetro. Evite atrapar burbujas de aire en el pocillo de muestra.
2. Espere a que aparezcan las líneas de color. **Lea los resultados en 1 minuto**. No interprete el resultado después de 10 minutos.
3. **Para el panel de prueba de dos lados, dé vuelta el panel y repita el paso 1** anterior para realizar la prueba en el otro lado.

**Nota: Lea las tiras de adulteración y la tira de alcohol durante 1 minuto según la tabla de colores que se proporciona por separado o en la bolsa de aluminio**, cuando corresponda. Consulte su Política de no consumir drogas para conocer las pautas sobre muestras adulteradas. Recomendamos no interpretar los resultados de la prueba de drogas y volver a analizar la orina o recolectar otra muestra en caso de que el resultado sea positivo en cualquier prueba de adulteración.

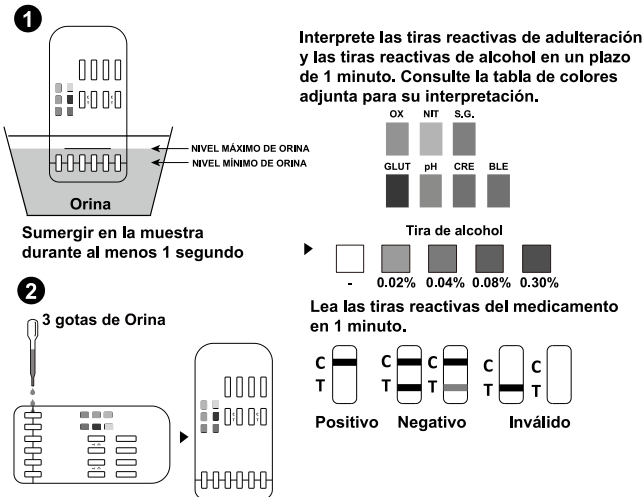

### 【INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS】

(Refiérase a la figura)

**NEGATIVO:\*** Aparecen líneas de color en la región de control (C) y en la región del test (T). Este resultado negativo indica que la concentración de la droga particular analizada en la muestra de orina está por debajo del valor del cut-off para la droga de que se trate.

**\*NOTA:** La intensidad de la línea de color en la región del test (T) puede variar. El resultado debe considerarse negativo aunque el color de la línea sea débil.

**POSITIVO:** Sólo aparece una línea de color en la region de control (C) y no aparece línea de color en la región del test (T). El resultado positivo indica que la concentración de la droga en la muestra de orina es superior al valor del cut-off específico de esa droga.

**INVÁLIDO:** No aparece línea de color en la región de control (C). Las razones más comunes para la ausencia de la línea de color en la región de Control son insuficiente volumen de muestra o un procedimiento aplicado incorrectamente. Leer las instrucciones de nuevo y repetir la prueba empleando un nuevo test. Si el resultado continua siendo inválido, contactar con el fabricante.

### 【 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS (CONTROLES DE VALIDEZ DE MUESTRA/ADULTERACIÓN)】

(Por favor refiérase a la tarjeta de color)

Los resultados semicuantitativos se obtienen mediante la comparación visual de los bloques de color que han reaccionado en la tira con los bloques de color impresos en la tarjeta de colores. No se requiere ninguna instrumentación.

### 【INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ( TIRA DE ALCOHOL)】

**Negativo:** Casi no hay cambio de color mediante la comparación con el fondo. El resultado negativo indica que el nivel de alcohol en la orina es menor que 0,02%.

**Positivo:** Un color distinto desarrollado por la almohadilla. El resultado positivo indica que la concentración de alcohol en la orina es de 0,02% o superior.

**Inválido:** La prueba debe considerarse inválida si sólo el borde de la almohadilla reactiva cambió de color ya que podría atribuirse a la insuficiencia de muestra. El sujeto debe volver a hacer la prueba. Además, si la almohadilla de color tiene un color azul antes de añadir la muestra de orina, no utilice el test.

### 【CONTROL DE CALIDAD】

Un control del procedimiento se incluye en el test. La línea de color que aparece en la región de control (C) se considera un control interno que confirma que se ha utilizado un volumen de muestra suficiente y se ha aplicado el procedimiento correctamente.

No se suministran controles estándar con el kit. No obstante, se recomienda probar controles positivos y negativos como buena práctica de laboratorio para confirmar el procedimiento del test y verificar el funcionamiento apropiado del mismo.

### 【LIMITACIONES】

1. El test Multidrogas en Panel proporciona sólo un resultado analítico cualitativo preliminar. Para la confirmación de un resultado debe emplearse otro método analítico, siendo los preferidos la Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas (GC/MS).<sup>4,5</sup>
2. Existe la posibilidad de que errores técnicos o de procedimiento, así como la presencia de sustancias que interfieran en la muestra de orina puedan dar lugar a resultados erróneos.
3. Adulterantes, tales como lejía en las muestras de orina pueden dar resultados erróneos con independencia del método analítico utilizado. De sospechar este tipo de adulteración, debe repetirse el test con otra muestra de orina.
4. Un resultado positivo no indica el nivel de la intoxicación, la ruta de administración de la droga o su concentración en la orina.
5. Un resultado negativo puede que no necesariamente indique que la orina está libre de droga, ya que puede haber droga presente pero por debajo del nivel del cut-off del test.
6. El test no distingue entre drogas de abuso y ciertos medicamentos.
7. Se puede obtener un resultado positivo a consecuencia del consumo de ciertos alimentos o suplementos dietéticos.

### 【LIMITACIONES DE LA ADULTERACIÓN】

1. Las pruebas de adulteración (controles de validez de muestra) incluidas en el producto están destinados a ayudar en la determinación de las muestras anormales. Aunque son completas, estas pruebas no están destinados a ser una representación "todo incluido" de posibles adulterantes.
2. **Oxidantes/PCC:** la orina humana normal no debería contener agentes oxidantes o PCC. La presencia de altos niveles de antioxidantes presentes en la muestra, tales como el ácido ascórbico, puede dar lugar a resultados falsos negativos para los oxidantes/almohadilla de PCC.
3. **Densidad:** Niveles elevados de proteínas en la orina pueden ocasionar que los valores de la densidad sean anormalmente altos.
4. **Nitrito:** el nitrito no es un componente normal de la orina humana. Sin embargo, el nitrito si

se encuentra en la orina puede indicar infecciones del tracto urinario o infecciones bacterianas. Los niveles de nitrito de >20 mg/dL pueden producir resultados falsos positivos de glutaraldehído.

5. **Glutaraldehído:** no se encuentra normalmente en la orina. Sin embargo ciertas anomalías metabólicas tales como la cetoacidosis (ayuno, la diabetes no controlada o dietas altas en proteínas) pueden interferir con los resultados de las pruebas.
6. **Creatinina:** los niveles de creatinina normal son entre 20 y 350 mg/dL. En condiciones raras, ciertas enfermedades renales pueden mostrar orina diluida.
7. **Blanqueantes/Lejía:** la orina humana normal no debe contener lejía. La presencia de altos niveles de lejía en la muestra puede dar lugar a resultados falsos negativos en la almohadilla correspondiente.
8. **pH:** pH normal entre 4,0 y 9,0.

### 【CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO】

|                    |              | Precisión<br>% Acuerdo con GC/MS |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|--------------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                    | ACE<br>5,000 | AMP<br>1,000                     | AMP<br>500 | AMP<br>300 | BAR<br>300 | BAR<br>200 | BZO<br>500 | BZO<br>300 | BZO<br>200 | BZO<br>100 | BUP<br>10 |
| Acuerdo Positivo   | 93.5%        | 98.1%                            | 99.1%      | 99.1%      | 96.1%      | 95.3%      | 98.2%      | 98.4%      | 99.2%      | 99.2%      | 99.1%     |
| Acuerdo Negativo   | 98.6%        | 97.9%                            | 98.6%      | 98.5%      | 98.6%      | 97.9%      | 97.8%      | 99.2%      | 98.4%      | 97.5%      | >99.9%    |
| Resultados totales | 97.0%        | 98.0%                            | 98.8%      | 98.8%      | 97.6%      | 96.8%      | 98.0%      | 98.8%      | 98.8%      | 98.4%      | 99.6%     |

|                    | BUP<br>5 | COC<br>300 | COC<br>200 | COC<br>150 | COC<br>100 | THC<br>300 | THC<br>150 | THC<br>50 | THC<br>25 | THC<br>20 | MTD<br>300 |
|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Acuerdo Positivo   | 99.1%    | 98.2%      | >99.9%     | 98.3%      | 99.2%      | 95.5%      | 94.5%      | 97.9%     | 96.9%     | 94.8%     | 98.9%      |
| Acuerdo Negativo   | >99.9%   | 97.8%      | >99.9%     | 97.0%      | 97.0%      | 98.1%      | 97.5%      | 98.1%     | 97.4%     | 99.3%     | 98.8%      |
| Resultados totales | 99.6%    | 98.0%      | 100.0%     | 97.6%      | 98.0%      | 97.2%      | 96.4%      | 98.0%     | 97.2%     | 97.6%     | 98.8%      |

|                    | MTD<br>200 | MET<br>1,000 | MET<br>500 | MET<br>300 | MDMA<br>1,000 | MDMA<br>500 | MDMA<br>300 | MOP/<br>OPI<br>300 | MOP/<br>OPI<br>100 | MLQ<br>300 | OPI<br>2,000 |
|--------------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|
| Acuerdo Positivo   | 98.9%      | 96.2%        | 97.6%      | 97.8%      | 98.0%         | 98.1%       | 98.1%       | 95.0%              | 97.0%              | 99.8%      | 96.7%        |
| Acuerdo Negativo   | 98.7%      | 97.1%        | 97.0%      | 97.5%      | 99.3%         | 99.3%       | 99.3%       | 95.3%              | 96.6%              | 93.2%      | 93.8%        |
| Resultados totales | 98.8%      | 96.8%        | 97.2%      | 97.6%      | 98.8%         | 98.8%       | 98.8%       | 95.2%              | 96.8%              | 92.0%      | 95.2%        |

|                    | PCP<br>25 | PPX<br>300 | TCA<br>1,000 | TCA<br>500 | TML<br>100 | TML<br>200 | TML<br>300 | KET<br>1,000 | KET<br>500 | KET<br>300 | KET<br>100 |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| Acuerdo Positivo   | 92.4%     | 96.0%      | 94.8%        | 94.9%      | 88.2%      | 88.2%      | 88.0%      | 97.5%        | 97.6%      | 96.7%      | 96.0%      |
| Acuerdo Negativo   | 96.8%     | 94.0%      | 91.6%        | 92.1%      | 92.4%      | 96.2%      | 96.2%      | 98.2%        | 98.2%      | 97.5%      | 97.3%      |
| Resultados totales | 95.2%     | 94.8%      | 92.8%        | 93.2%      | 90.8%      | 93.2%      | 93.2%      | 98.0%        | 98.0%      | 97.2%      | 96.8%      |

|                    | OXY<br>100 | OXY<br>300 | COT<br>500 | COT<br>200 | COT<br>100 | COT<br>50 | COT<br>10 | EDDP<br>300 | EDDP<br>100 | FYL<br>20 | FYL<br>10 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Acuerdo Positivo   | 97.7%      | 96.5%      | 95.7%      | 96.7%      | 97.9%      | 96.7%     | 97.8%     | 97.9%       | 96.9%       | 98.8%     | 98.8%     |
| Acuerdo Negativo   | 99.4%      | 99.4%      | 96.1%      | 97.5%      | 98.1%      | 97.5%     | 98.1%     | 99.4%       | 96.7%       | 99.4%     | 99.4%     |
| Resultados totales | 98.8%      | 98.4%      | 96.0%      | 97.2%      | 98.0%      | 97.2%     | 98.0%     | 98.8%       | 96.8%       | 99.2%     | 99.2%     |

|                  | K2<br>50 | K2<br>30 | 6-MAM<br>10 | MDA<br>500 | ETG<br>500 | ETG<br>1,000 | CLO<br>400 | CLO<br>150 | LSD<br>10 | LSD<br>20 | LSD<br>50 |
|------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Acuerdo Positivo | 97.5%    | 97.6%    | 97.7%       | 98.1%      | 97.6%      | 95.3%        | 97.1%      | 99.0%      | 94.3%     | 94.3%     | 94.1%     |

|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acuerdo Negativo   | 98.2% | 98.8% | 98.1% | 97.9% | 99.4% | 99.4% | 99.3% | 98.6% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Resultados totales | 98.0% | 98.4% | 98.0% | 98.0% | 98.8% | 98.0% | 98.4% | 98.8% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |

|                    | MPD 300   | MPD 1,000 | ZOL 50  | DIA 300    | DIA 200  | ZOP 50  | MCAT 500 | 7-ACL 300 | 7-ACL 200   | 7-ACL 100 | CFYL 500 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|------------|----------|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| Acuerdo Positivo   | 94.6%     | 94.6%     | 90.9%   | 98.4%      | 98.4%    | 86.4%   | 90.9%    | 94.1%     | 94.6%       | 94.7%     | 94.7%    |
| Acuerdo Negativo   | 98.4%     | 98.4%     | 97.1%   | 99.2%      | 99.2%    | 97.2%   | 95.0%    | 97.7%     | 97.6%       | 97.5%     | 98.6%    |
| Resultados totales | 97.0%     | 97.0%     | 95.6%   | 98.8%      | 98.8%    | 94.6%   | 94.1%    | 96.2%     | 96.2%       | 96.2%     | 97.3%    |
|                    | CAF 1,000 | CAT 150   | TRO 350 | MDPV 1,000 | MDPV 500 | MEP 100 | ALP 100  | ABP/K3 10 | α-PVP 1,000 | CNB 500   | MPRD 100 |
| Acuerdo Positivo   | 91.3%     | 90.5%     | 92.0%   | 93.3%      | 93.1%    | 90.5%   | 90.9%    | 92.0%     | 92.1%       | 95.8%     | 95.0%    |
| Acuerdo Negativo   | 95.7%     | 97.3%     | 97.0%   | 98.6%      | 98.3%    | 97.0%   | 97.4%    | 97.1%     | 96.8%       | 97.6%     | 94.2%    |
| Resultados totales | 94.6%     | 95.8%     | 95.6%   | 97.0%      | 96.6%    | 95.4%   | 95.9%    | 95.8%     | 95.0%       | 96.9%     | 94.4%    |

|                    | PGB 50,000 | TZD 200 | UR-144 /K4 25 | ZAL 100 | MES 100 | GAB 2,000 | MOP/ OPI 200 | ETG 300 | α-PVP 500 | TLD 50 | QTP 1,000 |
|--------------------|------------|---------|---------------|---------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|
| Acuerdo Positivo   | 90.9%      | 92.9%   | 97.1%         | 95.2%   | 95.8%   | 92.3%     | 95.0%        | 98.8%   | 91.9%     | 97.3%  | 97.1%     |
| Acuerdo Negativo   | 97.3%      | 96.1%   | 98.4%         | 97.4%   | 97.6%   | 98.5%     | 96.0%        | 99.4%   | 95.2%     | 98.3%  | 98.3%     |
| Resultados totales | 95.9%      | 95.2%   | 98.0%         | 96.7%   | 96.9%   | 96.7%     | 95.6%        | 99.2%   | 94.0%     | 97.9%  | 97.9%     |

|                    | PAP 500 | KRA 300 | CAR 2,000 | FLX 500 | K2 25 | CIT 500 | FKET 1,000 | RPD 150 | FYL 100 | FYL 200 | CFYL 250 |
|--------------------|---------|---------|-----------|---------|-------|---------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Acuerdo Positivo   | 96.9%   | 95.7%   | 95.0%     | 97.1%   | 97.6% | 93.3%   | 96.7%      | 93.3%   | 98.8%   | 97.5%   | 94.7%    |
| Acuerdo Negativo   | 98.0%   | 98.3%   | 94.2%     | 96.6%   | 98.2% | 95.5%   | 97.0%      | 95.5%   | 99.4%   | 99.4%   | 98.6%    |
| Resultados totales | 97.6%   | 97.6%   | 94.4%     | 96.8%   | 98.0% | 94.8%   | 96.9%      | 94.8%   | 99.2%   | 98.8%   | 97.3%    |

|                    | PGB 500 | MES 300 | OZP 1,000 | MDPV 300 | α-PVP 2,000 | α-PVP 300 | TAP 1,000 | NND 1,000 | SCOP 500 | MTZ 500 |
|--------------------|---------|---------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| Acuerdo Positivo   | 95.2%   | 95.8%   | 95.8%     | 93.8%    | 86.8%       | 92.1%     | 94.4%     | 96.7%     | 93.5%    | 93.3%   |
| Acuerdo Negativo   | 96.3%   | 97.6%   | 97.6%     | 97.1%    | 96.8%       | 95.2%     | 98.2%     | 97.0%     | 98.6%    | 95.6%   |
| Resultados totales | 96.0%   | 96.9%   | 96.9%     | 96.1%    | 93.0%       | 94.0%     | 96.7%     | 96.9%     | 97.0%    | 94.9%   |

|                    | COT 300 | THC 200 | THC 30 | MEP 500 | MPD 150 | OPI 1,000 | PCP 50 | TML 500 | TCA 300 | CAR 1,000 | FYL 300 |
|--------------------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|-----------|---------|
| Acuerdo Positivo   | 97.7%   | 93.4%   | 97.9%  | 95.2%   | 91.9%   | 95.9%     | 92.3%  | 92.9%   | 94.9%   | 90.0%     | 97.0%   |
| Negative Agreement | 97.5%   | 97.5%   | 98.1%  | 98.5%   | 98.4%   | 93.8%     | 96.9%  | 98.1%   | 92.1%   | 98.1%     | 98.9%   |
| Resultados totales | 97.6%   | 96.0%   | 98.0%  | 97.7%   | 96.0%   | 94.8%     | 95.2%  | 96.9%   | 93.2%   | 95.8%     | 98.6%   |

|                  | HMO 250 | HMO 300 | HMO 500 | MET 200 | CAR 500 | COC 1,500 | ETG 1,500 | ZOP 300 | ZOL 25 | OPI 500 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|--------|---------|
| Acuerdo Positivo | 93.8%   | 91.7%   | 91.7%   | 97.6%   | 90.0%   | 92.0%     | 97.7%     | 90.9%   | 90.9%  | 97.3%   |
| Acuerdo Negativo | 97.5%   | 98.7%   | 98.7%   | 97.0%   | 92.3%   | 98.3%     | 99.4%     | 97.2%   | 97.1%  | 96.4%   |

| Resultados totales | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 97.2% | 91.7% | 95.2% | 98.8% | 95.7% | 95.6% | 96.8% |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| % Acuerdo con Kit Comercial |                     |                     |                     |                        |                 |              |                        |                |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                             | ACE 5,000           | AMP 1,000/ 500/ 300 | BAR 300/ 200        | BZO 500/ 300/ 200/ 100 | BUP 10/5        | COC 300/ 100 | COC 1,500/ 200/ 150    | THC 150/50/ 25 | THC 300/ 200/30/ 20 | MPD 1,000/ 300/ 150 |
| Acuerdo Positivo            | *                   | >99.9%              | >99.9%              | >99.9%                 | >99.9%          | >99.9%       | *                      | >99.9%         | *                   | *                   |
| Acuerdo Negativo            | *                   | >99.9%              | >99.9%              | >99.9%                 | >99.9%          | >99.9%       | *                      | >99.9%         | *                   | *                   |
| Resultados totales          | *                   | >99.9%              | >99.9%              | >99.9%                 | >99.9%          | >99.9%       | *                      | >99.9%         | *                   | *                   |
|                             | 7-ACL 300/ 200/ 100 | MTD 300/ 200        | MET 1,000/ 500/ 300 | MET 200                | MDMA 1,000/ 500 | MDMA 300     | MOP/ OPI 300/ 200/ 100 | MQL 300        | MEP 500/ 100        | LSD 50/20/ 10       |
| Acuerdo Positivo            | *                   | >99.9%              | >99.9%              | *                      | >99.9%          | *            | >99.9%                 | >99.9%         | *                   | *                   |
| Acuerdo Negativo            | *                   | >99.9%              | >99.9%              | *                      | >99.9%          | *            | >99.9%                 | >99.9%         | *                   | *                   |
| Resultados totales          | *                   | >99.9%              | >99.9%              | *                      | >99.9%          | *            | >99.9%                 | >99.9%         | *                   | *                   |

|                    | PPX 300 | TCA 1,000/ 500/ 300 | TML 500/ 300/ 200/ 100 | KET 1,000/ 500/ 300/ 100 | COT 500/ 300/ 200/ 100/50/ 10 | OPI 2,000/ 1,000/ 500 | PCP 50 | PCP 25 | DIA 300/ 200 | MDPV 1,000/ 500/ 300 |
|--------------------|---------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------------|----------------------|
| Acuerdo Positivo   | >99.9%  | *                   | *                      | >99.9%                   | *                             | *                     | *      | >99.9% | *            | *                    |
| Acuerdo Negativo   | >99.9%  | *                   | *                      | >99.9%                   | *                             | *                     | *      | >99.9% | *            | *                    |
| Resultados totales | >99.9%  | *                   | *                      | >99.9%                   | *                             | *                     | *      | >99.9% | *            | *                    |

|                    | OXY 300/ 100 | EDDP 300/ 100 | FYL 300/ 200/ 100/20 /10 | K2-50/ 30/25 | 6-MAM 10 | MDA 500 | ETG 1,500/ 1,000/ 500/ 300 | CLO 400/ 150 | ZOL 50/25 | ZOP 300/50 | MCAT 500 |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|----------|---------|----------------------------|--------------|-----------|------------|----------|
| Acuerdo Positivo   | *            | *             | *                        | *            | *        | *       | *                          | *            | *         | *          | *        |
| Acuerdo Negativo   | *            | *             | *                        | *            | *        | *       | *                          | *            | *         | *          | *        |
| Resultados totales | *            | *             | *                        | *            | *        | *       | *                          | *            | *         | *          | *        |

|                    | CFYL 500/ 250 | CAF 1,000 | CAT 150 | TRO 350 | ALP 100 | PGB 50,000/ 500 | ABP/ K3 10 | CNB 500 | TZD 200 | GAB 2,000 |
|--------------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|-----------------|------------|---------|---------|-----------|
| Acuerdo Positivo   | *             | *         | *       | *       | *       | *               | *          | *       | *       | *         |
| Acuerdo Negativo   | *             | *         | *       | *       | *       | *               | *          | *       | *       | *         |
| Resultados totales | *             | *         | *       | *       | *       | *               | *          | *       | *       | *         |

|                  | CAR 2,000/ 1,000/ 500 | MPRD 100 | QTP 1,000 | FLX 500 | UR-144 /K4 25 | KRA 300 | TLD 50 | α-PVP 2,000/ 1,000/ 500/ 300 | MES 100/ 300 | ZAL 100 |
|------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|---------------|---------|--------|------------------------------|--------------|---------|
| Acuerdo Positivo | *                     | *        | *         | *       | *             | *       | *      | *                            | *            | *       |

|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuerdo Negativo   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Resultados totales | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

|                    | CIT 500 | FKET 1,000 | RPD 150 | TAP 1,000 | NND 1,000 | SCOP 500 | MTZ 500 | OZP 1,000 | PAP 500 | HMO 500/ 300/ 250 |
|--------------------|---------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|---------|-------------------|
| Acuerdo Positivo   | *       | *          | *       | *         | *         | *        | *       | *         | *       | *                 |
| Acuerdo Negativo   | *       | *          | *       | *         | *         | *        | *       | *         | *       | *                 |
| Resultados totales | *       | *          | *       | *         | *         | *        | *       | *         | *       | *                 |

\* Nota: Basado en datos GC/MS en lugar de Kit Comercial.

#### Precisión

Se realizó un estudio en tres hospitales por operarios no entrenados utilizando tres lotes diferentes de producto para demostrar la precisión intra-ensayo y la precisión del operario. Se empleó una tarjeta idéntica de muestras codificadas que contenían drogas con concentraciones de ± 50% y ± 25% del nivel del cut-off, se etiquetaron, y iegas se probaron en cada lugar. Los resultados obtuvieron una precisión de ≥ 75% en muestras de nivel de corte de ± 25% y una precisión del 100% en muestras negativas y de nivel de corte de ± 50%.

#### Sensibilidad Analítica

En un conjunto de muestras de orina libres de droga se añadieron drogas a las concentraciones que se indican y los resultados se resumen debajo.

| Concentración de Droga Rango del Cut-off | ACE 5,000 |    | AMP 1,000 |    | AMP 500 |    | AMP 300 |    | BAR 300 |    | BAR 200 |    | BZO 500 |    | BZO 300 |    | OPI 500 |    |
|------------------------------------------|-----------|----|-----------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
|                                          | -         | +  | -         | +  | -       | +  | -       | +  | -       | +  | -       | +  | -       | +  | -       | +  | 500     |    |
| 0% Cut-off                               | 30        | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  |
| -50% Cut-off                             | 30        | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  |
| -25% Cut-off                             | 26        | 4  | 26        | 4  | 25      | 5  | 27      | 3  | 27      | 3  | 26      | 4  | 27      | 3  | 27      | 3  | 27      | 3  |
| Cut-off                                  | 14        | 16 | 15        | 15 | 15      | 15 | 15      | 15 | 15      | 15 | 15      | 15 | 15      | 15 | 15      | 15 | 14      | 16 |
| +25% Cut-off                             | 3         | 27 | 3         | 27 | 3       | 27 | 4       | 26 | 4       | 26 | 3       | 27 | 4       | 26 | 3       | 27 | 4       | 26 |
| +50% Cut-off                             | 0         | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 |
| 300% Cut-off                             | 0         | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 |

| Concentración de Droga Rango del Cut-off | BZO 200 |    | BZO 100 |    | BUP 10 |    | BUP 5 |    | COC 1,500 |    | COC 300 |    | COC 200 |    | COC 150 |    | COC 100 |    |
|------------------------------------------|---------|----|---------|----|--------|----|-------|----|-----------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
|                                          | -       | +  | -       | +  | -      | +  | -     | +  | -         | +  | -       | +  | -       | +  | -       | +  | -       | +  |
| 0% Cut-off                               | 30      | 0  | 30      | 0  | 30     | 0  | 30    | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  |
| -50% Cut-off                             | 30      | 0  | 30      | 0  | 30     | 0  | 30    | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  |
| -25% Cut-off                             | 27      | 3  | 27      | 3  | 26     | 4  | 26    | 4  | 25        | 5  | 26      | 4  | 26      | 4  | 27      | 3  | 27      | 3  |
| Cut-off                                  | 16      | 14 | 14      | 16 | 14     | 16 | 14    | 16 | 15        | 15 | 13      | 17 | 14      | 16 | 16      | 14 | 16      | 14 |
| +25% Cut-off                             | 3       | 27 | 3       | 27 | 3      | 27 | 3     | 27 | 3         | 27 | 3       | 27 | 3       | 27 | 4       | 26 | 4       | 26 |
| +50% Cut-off                             | 0       | 30 | 0       | 30 | 0      | 30 | 0     | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 |
| 300% Cut-off                             | 0       | 30 | 0       | 30 | 0      | 30 | 0     | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 |

| Concentración de Droga Rango del Cut-off | THC 150 |    | THC 50 |    | THC 25 |    | MTD 300 |    | MTD 200 |    | MET 1,000 |    | MET 500 |    | MET 300 |    | MET 200 |    |
|------------------------------------------|---------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|----|-----------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
|                                          | -       | +  | -      | +  | -      | +  | -       | +  | -       | +  | -         | +  | -       | +  | -       | +  | -       | +  |
| 0% Cut-off                               | 30      | 0  | 30     | 0  | 30     | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  |
| -50% Cut-off                             | 30      | 0  | 30     | 0  | 30     | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  |
| -25% Cut-off                             | 27      | 3  | 26     | 4  | 27     | 3  | 27      | 3  | 27      | 3  | 27        | 3  | 27      | 3  | 27      | 3  | 27      | 3  |
| Cut-off                                  | 15      | 15 | 14     | 16 | 15     | 15 | 13      | 17 | 15      | 15 | 16        | 14 | 15      | 15 | 16      | 14 | 15      | 15 |
| +25% Cut-off                             | 4       | 26 | 3      | 27 | 4      | 26 | 4       | 26 | 4       | 26 | 3         | 27 | 4       | 26 | 3       | 27 | 4       | 26 |
| +50% Cut-off                             | 0       | 30 | 0      | 30 | 0      | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 |
| 300% Cut-off                             | 0       | 30 | 0      | 30 | 0      | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 |

| Concentración de Droga Rango del Cut-off | MDMA 1,000 |    | MDMA 500 |    | MOP/ OPI 300 |    | MOP/ OPI 100 |    | OPI 2,000 |    | PCP 50 |    | PCP 25 |    | PPX 300 |    |
|------------------------------------------|------------|----|----------|----|--------------|----|--------------|----|-----------|----|--------|----|--------|----|---------|----|
|                                          | -          | +  | -        | +  | -            | +  | -            | +  | -         | +  | -      | +  | -      | +  | -       | +  |
| 0% Cut-off                               | 30         | 0  | 30       | 0  | 30           | 0  | 30           | 0  | 30        | 0  | 30     | 0  | 30     | 0  | 30      | 0  |
| -50% Cut-off                             | 30         | 0  | 30       | 0  | 30           | 0  | 30           | 0  | 30        | 0  | 30     | 0  | 30     | 0  | 30      | 0  |
| -25% Cut-off                             | 26         | 4  | 25       | 5  | 26           | 4  | 26           | 4  | 27        | 3  | 26     | 4  | 25     | 5  | 26      | 4  |
| Cut-off                                  | 15         | 15 | 14       | 16 | 15           | 15 | 15           | 15 | 15        | 15 | 15     | 15 | 15     | 15 | 14      | 16 |
| +25% Cut-off                             | 5          | 25 | 4        | 26 | 3            | 27 | 3            | 27 | 5         | 25 | 3      | 27 | 3      | 27 | 3       | 27 |
| +50% Cut-off                             | 0          | 30 | 0        | 30 | 0            | 30 | 0            | 30 | 0         | 30 | 0      | 30 | 0      | 30 | 0       | 30 |

|              |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|--------------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 300% Cut-off | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
|--------------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|

| Concentración<br>de Droga Rango<br>del Cut-off | TML<br>100 |    | TML<br>200 |    | TML<br>300 |    | TML<br>500 |    | KET<br>1,000 |    | KET<br>500 |    | KET<br>300 |    | KET<br>100 |    | MQL<br>300 |    |
|------------------------------------------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
|                                                | -          | +  | -          | +  | -          | +  | -          | +  | -            | +  | -          | +  | -          | +  | -          | +  | -          | +  |
| 0% Cut-off                                     | 30         | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30           | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  |
| -50% Cut-off                                   | 30         | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30           | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  |
| -25% Cut-off                                   | 27         | 3  | 27         | 3  | 27         | 3  | 26         | 4  | 27           | 3  | 27         | 3  | 26         | 4  | 27         | 3  | 27         | 3  |
| Cut-off                                        | 15         | 15 | 15         | 15 | 15         | 15 | 14         | 16 | 16           | 14 | 15         | 15 | 15         | 15 | 15         | 15 | 15         | 15 |
| +25% Cut-off                                   | 4          | 26 | 4          | 26 | 4          | 26 | 3          | 27 | 3            | 27 | 4          | 26 | 4          | 26 | 3          | 27 | 4          | 26 |
| +50% Cut-off                                   | 0          | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0            | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 |
| 300% Cut-off                                   | 0          | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0            | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 |

| Concentración de Droga Rango del Cut-off | OXY 100 |    | OXY 300 |    | COT 200 |    | COT 100 |    | EDDP 300 |    | EDDP 100 |    | FYL 20 |    | FYL 10 |    |
|------------------------------------------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|----------|----|----------|----|--------|----|--------|----|
|                                          | -       | +  | -       | +  | -       | +  | -       | +  | -        | +  | -        | +  | -      | +  | -      | +  |
| 0% Cut-off                               | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30       | 0  | 30       | 0  | 30     | 0  | 30     | 0  |
| -50% Cut-off                             | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30       | 0  | 30       | 0  | 30     | 0  | 30     | 0  |
| -25% Cut-off                             | 27      | 3  | 27      | 3  | 27      | 3  | 27      | 3  | 27       | 3  | 26       | 4  | 27     | 3  | 27     | 3  |
| Cut-off                                  | 15      | 15 | 15      | 15 | 15      | 15 | 14      | 16 | 15       | 15 | 15       | 15 | 14     | 16 | 15     | 15 |
| +25% Cut-off                             | 4       | 26 | 4       | 26 | 4       | 26 | 4       | 26 | 4        | 26 | 3        | 27 | 4      | 26 | 3      | 27 |
| +50% Cut-off                             | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0        | 30 | 0        | 30 | 0      | 30 | 0      | 30 |
| 300% Cut-off                             | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0        | 30 | 0        | 30 | 0      | 30 | 0      | 30 |

| Concentración de Droga Rango del Cut-off | K2 50 | K2 30 | 6-MAM 10 | MDA 500 | ETG 300 | ETG 500 | ETG 1,000 | CLO 400 | CLO 150 | LSD 20 |
|------------------------------------------|-------|-------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|
|                                          | - +   | - +   | - +      | - +     | - +     | - +     | - +       | - +     | - +     | - +    |
| 0% Cut-off                               | 30    | 0     | 30       | 0       | 30      | 0       | 30        | 0       | 30      | 0      |
| -50% Cut-off                             | 30    | 0     | 30       | 0       | 30      | 0       | 30        | 0       | 30      | 0      |
| -25% Cut-off                             | 26    | 4     | 27       | 3       | 27      | 3       | 26        | 4       | 26      | 4      |
| Cut-off                                  | 15    | 15    | 16       | 14      | 15      | 15      | 15        | 15      | 14      | 16     |
| +25% Cut-off                             | 3     | 27    | 4        | 26      | 3       | 27      | 4         | 26      | 3       | 27     |
| +50% Cut-off                             | 0     | 30    | 0        | 30      | 0       | 30      | 0         | 30      | 0       | 30     |
| 300% Cut-off                             | 0     | 30    | 0        | 30      | 0       | 30      | 0         | 30      | 0       | 30     |

| Concentración<br>de Droga Rango<br>del Cut-off | LSD<br>50 |    | ZOL<br>50 |    | ZOL<br>25 |    | MDMA<br>300 |    | THC<br>200 |    | MOP/<br>OPI<br>200 |    | MEP<br>500 |    | MEP<br>100 |    | MDPV<br>1,000 |    | ETG<br>1,500 |    |
|------------------------------------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-------------|----|------------|----|--------------------|----|------------|----|------------|----|---------------|----|--------------|----|
|                                                | -         | +  | -         | +  | -         | +  | -           | +  | -          | +  | -                  | +  | -          | +  | -          | +  | -             | +  | -            | +  |
|                                                |           |    |           |    |           |    |             |    |            |    |                    |    |            |    |            |    |               |    |              |    |
| 0% Cut-off                                     | 30        | 0  | 30        | 0  | 30        | 0  | 30          | 0  | 30         | 0  | 30                 | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30            | 0  | 30           | 0  |
| -50% Cut-off                                   | 30        | 0  | 30        | 0  | 30        | 0  | 30          | 0  | 30         | 0  | 30                 | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30            | 0  | 30           | 0  |
| -25% Cut-off                                   | 27        | 3  | 26        | 4  | 25        | 5  | 25          | 5  | 26         | 4  | 26                 | 4  | 27         | 3  | 27         | 3  | 26            | 4  | 27           | 3  |
| Cut-off                                        | 14        | 16 | 14        | 16 | 15        | 15 | 15          | 15 | 15         | 15 | 15                 | 15 | 15         | 15 | 17         | 13 | 14            | 16 | 15           | 15 |
| +25% Cut-off                                   | 3         | 27 | 5         | 25 | 4         | 26 | 3           | 27 | 4          | 26 | 4                  | 26 | 4          | 26 | 5          | 25 | 3             | 27 | 3            | 27 |
| +50% Cut-off                                   | 0         | 30 | 0         | 30 | 0         | 30 | 0           | 30 | 0          | 30 | 0                  | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0             | 30 | 0            | 30 |
| 300% Cut-off                                   | 0         | 30 | 0         | 30 | 0         | 30 | 0           | 30 | 0          | 30 | 0                  | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0             | 30 | 0            | 30 |

| Concentración de Droga<br>Rango del Cut-off | MDPV 500 |    | MDPV 300 |    | DIA 300 |    | DIA 200 |    | THC 300 |    | THC 30 |    | K2 25 |    | ZOP 300 |    | ZOP 50 |    | MCAT 500 |    |
|---------------------------------------------|----------|----|----------|----|---------|----|---------|----|---------|----|--------|----|-------|----|---------|----|--------|----|----------|----|
|                                             | -        | +  | -        | +  | -       | +  | -       | +  | -       | +  | -      | +  | -     | +  | -       | +  | -      | +  | -        | +  |
|                                             |          |    |          |    |         |    |         |    |         |    |        |    |       |    |         |    |        |    |          |    |
| 0% Cut-off                                  | 30       | 0  | 30       | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30     | 0  | 30    | 0  | 30      | 0  | 30     | 0  | 30       | 0  |
| -50% Cut-off                                | 30       | 0  | 30       | 0  | 30      | 0  | 29      | 1  | 30      | 0  | 30     | 0  | 30    | 0  | 30      | 0  | 30     | 0  | 30       | 0  |
| -25% Cut-off                                | 25       | 5  | 26       | 4  | 27      | 3  | 27      | 3  | 26      | 4  | 26     | 4  | 25    | 5  | 28      | 2  | 27     | 3  | 28       | 2  |
| Cut-off                                     | 15       | 15 | 14       | 16 | 15      | 15 | 15      | 15 | 15      | 15 | 14     | 16 | 14    | 16 | 17      | 13 | 17     | 13 | 17       | 13 |
| +25% Cut-off                                | 3        | 27 | 3        | 27 | 3       | 27 | 3       | 27 | 4       | 26 | 4      | 26 | 3     | 27 | 3       | 27 | 4      | 26 | 3        | 27 |
| +50% Cut-off                                | 0        | 30 | 0        | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 1       | 29 | 0      | 30 | 0     | 30 | 0       | 30 | 0      | 30 | 0        | 30 |
| 300% Cut-off                                | 0        | 30 | 0        | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0      | 30 | 0     | 30 | 0       | 30 | 0      | 30 | 0        | 30 |

| Concentración de Droga | 7-ACL 300 | 7-ACL 200 | 7-ACL 100 | CFYL 500 | CAF 1,000 | CAT 150 | TRO 350 | ALP 100 | α-PVP 1,000 |    |    |    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|-------------|----|----|----|
| Rango del Cut-off      | -         | +         | -         | +        | -         | +       | -       | +       | -           | +  |    |    |
| 0% Cut-off             | 30        | 0         | 30        | 0        | 30        | 0       | 30      | 0       | 30          | 0  | 30 | 0  |
| -50% Cut-off           | 30        | 0         | 30        | 0        | 30        | 0       | 30      | 0       | 30          | 0  | 30 | 0  |
| -25% Cut-off           | 26        | 4         | 27        | 3        | 27        | 3       | 25      | 5       | 26          | 4  | 27 | 3  |
| Cut-off                | 14        | 16        | 14        | 16       | 13        | 17      | 14      | 16      | 17          | 13 | 15 | 15 |

|              |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|--------------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| +25% Cut-off | 5 | 25 | 3 | 27 | 4 | 26 | 6 | 24 | 6 | 24 | 4 | 26 | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | 27 |
| +50% Cut-off | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 300% Cut-off | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |

| Concentración de Droga<br>Rango del Cut-off | FYL 100 |    | COT 300 |    | TCA 1,000 |    | TCA 500 |    | TCA 300 |    | OPI 1,000 |    | THC 20 |    | CAR 2,000 |    | CAR 1,000 |    | CAR 500 |    |
|---------------------------------------------|---------|----|---------|----|-----------|----|---------|----|---------|----|-----------|----|--------|----|-----------|----|-----------|----|---------|----|
|                                             | -       | +  | -       | +  | -         | +  | -       | +  | -       | +  | -         | +  | -      | +  | -         | +  | -         | +  | -       | +  |
|                                             |         |    |         |    |           |    |         |    |         |    |           |    |        |    |           |    |           |    |         |    |
| 0% Cut-off                                  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30        | 0  | 30     | 0  | 30        | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  |
| -50% Cut-off                                | 30      | 0  | 30      | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30        | 0  | 30     | 0  | 30        | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  |
| -25% Cut-off                                | 27      | 3  | 25      | 5  | 25        | 5  | 26      | 4  | 27      | 3  | 27        | 3  | 26     | 4  | 28        | 2  | 27        | 3  | 27      | 3  |
| Cut-off                                     | 15      | 15 | 15      | 15 | 15        | 15 | 14      | 16 | 14      | 16 | 14        | 16 | 14     | 16 | 16        | 14 | 16        | 14 | 15      | 15 |
| +25% Cut-off                                | 3       | 27 | 4       | 26 | 4         | 26 | 3       | 27 | 4       | 26 | 4         | 26 | 3      | 27 | 4         | 26 | 4         | 26 | 4       | 26 |
| +50% Cut-off                                | 0       | 30 | 0       | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0         | 30 | 0      | 30 | 0         | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 |
| 300% Cut-off                                | 0       | 30 | 0       | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0         | 30 | 0      | 30 | 0         | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 |

| Concentración de Droga Rango del Cut-off | MPD 150 | MPD 300 | MPD 1,000 | PGB 50,000 | PGB 500 | GAB 2,000 | TZD 200 | CNB 500 | PAP 500 |    |
|------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----|
|                                          | -       | +       | -         | +          | -       | +         | -       | +       | -       | +  |
| 0% Cut-off                               | 30      | 0       | 30        | 0          | 30      | 0         | 30      | 0       | 30      | 0  |
| -50% Cut-off                             | 30      | 0       | 30        | 0          | 30      | 0         | 30      | 0       | 30      | 0  |
| -25% Cut-off                             | 26      | 4       | 27        | 3          | 26      | 4         | 25      | 5       | 28      | 2  |
| Cut-off                                  | 15      | 15      | 16        | 14         | 16      | 14        | 15      | 15      | 15      | 14 |
| +25% Cut-off                             | 5       | 25      | 5         | 25         | 5       | 25        | 6       | 24      | 3       | 27 |
| +50% Cut-off                             | 0       | 30      | 0         | 30         | 0       | 30        | 0       | 30      | 0       | 30 |
| 300% Cut-off                             | 0       | 30      | 0         | 30         | 0       | 30        | 0       | 30      | 0       | 30 |

| Concentración de Droga<br>Rango del<br>Cut-off | ABP/<br>K3<br>10 |    | QTP<br>1,000 |    | FLX<br>500 |    | KRA<br>300 |    | TLD<br>50 |    | α-PVP<br>2,000 |    | α-PVP<br>500 |    | α-PVP<br>300 |    | LSD<br>10 |    | HMO<br>500 |    |
|------------------------------------------------|------------------|----|--------------|----|------------|----|------------|----|-----------|----|----------------|----|--------------|----|--------------|----|-----------|----|------------|----|
|                                                | -                | +  | -            | +  | -          | +  | -          | +  | -         | +  | -              | +  | -            | +  | -            | +  | -         | +  | -          | +  |
| 0% Cut-off                                     | 30               | 0  | 30           | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30        | 0  | 30             | 0  | 30           | 0  | 30           | 0  | 30        | 0  | 30         | 0  |
| -50% Cut-off                                   | 30               | 0  | 30           | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30        | 0  | 30             | 0  | 30           | 0  | 30           | 0  | 30        | 0  | 30         | 0  |
| -25% Cut-off                                   | 25               | 5  | 29           | 1  | 29         | 1  | 28         | 2  | 29        | 1  | 26             | 4  | 27           | 3  | 27           | 3  | 27        | 3  | 28         | 2  |
| Cut-off                                        | 15               | 15 | 15           | 15 | 15         | 15 | 14         | 16 | 15        | 15 | 15             | 15 | 15           | 15 | 15           | 15 | 14        | 16 | 15         | 15 |
| +25% Cut-off                                   | 4                | 26 | 1            | 29 | 2          | 28 | 1          | 29 | 1         | 29 | 3              | 27 | 3            | 27 | 3            | 27 | 3         | 27 | 3          | 27 |
| +50% Cut-off                                   | 0                | 30 | 0            | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0         | 30 | 0              | 30 | 0            | 30 | 0            | 30 | 0         | 30 | 0          | 30 |
| 300% Cut-off                                   | 0                | 30 | 0            | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0         | 30 | 0              | 30 | 0            | 30 | 0            | 30 | 0         | 30 | 0          | 30 |

| Concentración de Droga<br>Rango del<br>Cut-off | COT<br>500 |    | COT<br>50 |    | COT<br>10 |    | CFYL<br>250 |    | FYL<br>200 |    | ZAL<br>100 |    | MPRD<br>100 |    | TAP<br>1,000 |    | CIT<br>500 |    | FKET<br>1,000 |    | FYL<br>300 |    |
|------------------------------------------------|------------|----|-----------|----|-----------|----|-------------|----|------------|----|------------|----|-------------|----|--------------|----|------------|----|---------------|----|------------|----|
|                                                | -          | +  | -         | +  | -         | +  | -           | +  | -          | +  | -          | +  | -           | +  | -            | +  | -          | +  | -             | +  | -          | +  |
|                                                |            |    |           |    |           |    |             |    |            |    |            |    |             |    |              |    |            |    |               |    |            |    |
| 0% Cut-off                                     | 30         | 0  | 30        | 0  | 30        | 0  | 30          | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30          | 0  | 30           | 0  | 30         | 0  | 30            | 0  | 30         | 0  |
| -50% Cut-off                                   | 30         | 0  | 30        | 0  | 30        | 0  | 30          | 0  | 30         | 0  | 30         | 0  | 30          | 0  | 30           | 0  | 30         | 0  | 30            | 0  | 30         | 0  |
| -25% Cut-off                                   | 26         | 4  | 27        | 3  | 27        | 3  | 25          | 5  | 27         | 3  | 27         | 3  | 27          | 3  | 27           | 3  | 27         | 3  | 27            | 3  | 27         | 3  |
| Cut-off                                        | 14         | 16 | 16        | 14 | 15        | 15 | 14          | 16 | 15         | 15 | 15         | 15 | 15          | 15 | 15           | 15 | 15         | 15 | 15            | 15 | 17         | 13 |
| +25% Cut-off                                   | 3          | 27 | 4         | 26 | 4         | 26 | 6           | 24 | 3          | 27 | 4          | 26 | 2           | 28 | 4            | 26 | 4          | 26 | 3             | 27 | 4          | 26 |
| +50% Cut-off                                   | 0          | 30 | 0         | 30 | 0         | 30 | 0           | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0           | 30 | 0            | 30 | 0          | 30 | 0             | 30 | 0          | 30 |
| 300% Cut-off                                   | 0          | 30 | 0         | 30 | 0         | 30 | 0           | 30 | 0          | 30 | 0          | 30 | 0           | 30 | 0            | 30 | 0          | 30 | 0             | 30 | 0          | 30 |

| Concentración de Droga Rango del Cut-off | RPD 150 |    | SCOP 500 |    | NND 1,000 |    | MTZ 500 |    | OZP 1,000 |    | MES 300 |    | MES 100 |    | UR-144/K4 25 |    | HMO 250 |    | HMO 300 |    |
|------------------------------------------|---------|----|----------|----|-----------|----|---------|----|-----------|----|---------|----|---------|----|--------------|----|---------|----|---------|----|
|                                          | -       | +  | -        | +  | -         | +  | -       | +  | -         | +  | -       | +  | -       | +  | -            | +  | -       | +  | -       | +  |
| 0% Cut-off                               | 30      | 0  | 30       | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30           | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  |
| -50% Cut-off                             | 30      | 0  | 30       | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  | 30        | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  | 30           | 0  | 30      | 0  | 30      | 0  |
| -25% Cut-off                             | 27      | 3  | 26       | 4  | 27        | 3  | 27      | 3  | 27        | 3  | 27      | 3  | 27      | 3  | 28           | 2  | 28      | 2  | 28      | 2  |
| Cut-off                                  | 15      | 15 | 14       | 16 | 15        | 15 | 15      | 14 | 16        | 14 | 16      | 14 | 16      | 15 | 15           | 15 | 15      | 15 | 15      | 15 |
| +25% Cut-off                             | 4       | 26 | 3        | 27 | 4         | 26 | 4       | 26 | 5         | 25 | 4       | 26 | 3       | 27 | 3            | 27 | 2       | 28 |         |    |
| +50% Cut-off                             | 0       | 30 | 0        | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0            | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 |
| 300% Cut-off                             | 0       | 30 | 0        | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 | 0         | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 | 0            | 30 | 0       | 30 | 0       | 30 |

Especificidad Analítica

La Tabla lista las concentraciones de los compuestos (ng/mL) que se detectan como positivos en orina con el test Multidrogas en Panel los 1 minuto.

| Analistas                       | conc. (ng/mL) | Analistas          | conc. (ng/mL) |
|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| ACETAMINOFENO (ACE 5,000)       |               |                    |               |
| Acetaminofeno                   | 5,000         |                    |               |
| ANFETAMINA (AMP 1,000)          |               |                    |               |
| Sulfato de D,L-Anfetamina       | 300           | Fentermina         | 1,000         |
| L-Anfetamina                    | 25,000        | Maprotilina        | 50,000        |
| (±) 3,4-Metilendioxi-anfetamina | 500           | Metoxifenamina     | 6,000         |
|                                 |               | D-anfetamina       | 1,000         |
| ANFETAMINA (AMP 500)            |               |                    |               |
| Sulfato de D,L-anfetamina       | 150           | Fentermina         | 500           |
| L-Anfetamina                    | 12,500        | Maprotilina        | 25,000        |
| (±) 3,4-Metilendioxi-anfetamina | 250           | Metoxifenamina     | 3,000         |
|                                 |               | D-anfetamina       | 500           |
| ANFETAMINA (AMP 300)            |               |                    |               |
| Sulfato de D,L-anfetamina       | 75            | Fentermina         | 300           |
| L-anfetamina                    | 10,000        | Maprotilina        | 15,000        |
| (±) 3,4-Metilendioxi-anfetamina | 150           | Metoxifenamina     | 2,000         |
|                                 |               | D-anfetamina       | 300           |
| BARBITÚRICOS (BAR 300)          |               |                    |               |
| Amobarbital                     | 5,000         | Alfenol            | 600           |
| 5,5-Difenilhidantoína           | 8,000         | Aprobarbital       | 500           |
| Alobarbital                     | 600           | Butabarbital       | 200           |
| Barbital                        | 8,000         | Butalbital         | 8,000         |
| Talbutal                        | 200           | Butethal           | 500           |
| Ciclopentobarbital              | 30,000        | Fenobarbital       | 300           |
| Pentobarbital                   | 8,000         | Secobarbital       | 300           |
| BARBITÚRICOS (BAR 200)          |               |                    |               |
| Amobarbital                     | 3,000         | Alfenol            | 400           |
| 5,5-Difenilhidantoína           | 5,000         | Aprobarbital       | 300           |
| Alobarbital                     | 400           | Butabarbital       | 150           |
| Barbital                        | 5,000         | Butalbital         | 5,000         |
| Talbutal                        | 150           | Butethal           | 300           |
| Ciclopentobarbital              | 20,000        | Fenobarbital       | 200           |
| Pentobarbital                   | 5,000         | Secobarbital       | 200           |
| BENZODIAZEPINAS (BZO 500)       |               |                    |               |
| Alprazolam                      | 200           | Bromazepam         | 1,500         |
| a-hidroxi-alprazolam            | 2,500         | Clordiazepóxido    | 1,500         |
| Clobazam                        | 300           | Nitrazepam         | 300           |
| Clonazepam                      | 800           | Norclordiazepóxido | 200           |
| Clorazepatedipotasio            | 800           | Nordiazepam        | 1,500         |
| Delorazepam                     | 1,500         | Oxazepam           | 500           |
| Desalquilflurazepam             | 300           | Temazepam          | 300           |
| Flunitrazepam                   | 300           | Diazepam           | 500           |
| (±)Lorazepam                    | 5,000         | Estazolam          | 10,000        |
| RS-Lorazepamglucurónido         | 300           | Triazolam          | 5,000         |
| Midazolam                       | 10,000        |                    |               |
| BENZODIAZEPINAS (BZO 300)       |               |                    |               |
| Alprazolam                      | 100           | Bromazepam         | 900           |
| a-hidroxi-alprazolam            | 1,500         | Clordiazepóxido    | 900           |
| Clobazam                        | 200           | Nitrazepam         | 200           |
| Clonazepam                      | 500           | Norclordiazepóxido | 100           |
| Clorazepatedipotasio            | 500           | Nordiazepam        | 900           |
| Delorazepam                     | 900           | Oxazepam           | 300           |
| Desalquilflurazepam             | 200           | Temazepam          | 100           |
| Flunitrazepam                   | 200           | Diazepam           | 300           |
| (±)Lorazepam                    | 3,000         | Estazolam          | 6,000         |
| RS-Lorazepamglucurónido         | 200           | Triazolam          | 3,000         |
| Midazolam                       | 6,000         |                    |               |
| BENZODIAZEPINAS (BZO 200)       |               |                    |               |
| Alprazolam                      | 70            | Bromazepam         | 600           |
| a-hidroxi-alprazolam            | 1,000         | Clordiazepóxido    | 600           |
| Clobazam                        | 120           | Nitrazepam         | 120           |
| Clonazepam                      | 300           | Norclordiazepóxido | 70            |
| Clorazepatedipotasio            | 300           | Nordiazepam        | 600           |
| Delorazepam                     | 600           | Oxazepam           | 200           |

|                                   |         |                                 |         |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Desalquilflurazepam               | 120     | Temazepam                       | 70      |
| Flunitrazepam                     | 120     | Diazepam                        | 200     |
| (±)Lorazepam                      | 2,000   | Estazolam                       | 4,000   |
| RS-Lorazepamglucurónido           | 120     | Triazolam                       | 2,000   |
| Midazolam                         | 4,000   |                                 |         |
| BENZODIAZEPINES (BZO 100)         |         |                                 |         |
| Alprazolam                        | 40      | Bromazepam                      | 300     |
| a-hidroxi alprazolam              | 500     | Clordiazepóxido                 | 300     |
| Clobazam                          | 60      | Nitrazepam                      | 60      |
| Clonazepam                        | 150     | Norclordiazepóxido              | 40      |
| Clorazepatedipotasio              | 150     | Nordiazepam                     | 300     |
| Delorazepam                       | 300     | Oxazepam                        | 100     |
| Desalquilflurazepam               | 60      | Temazepam                       | 40      |
| Flunitrazepam                     | 60      | Diazepam                        | 100     |
| (±)Lorazepam                      | 1,000   | Estazolam                       | 2,000   |
| RS-Lorazepamglucurónido           | 60      | Triazolam                       | 1,000   |
| Midazolam                         | 2,000   |                                 |         |
| BUPRENORFINA (BUP 10)             |         |                                 |         |
| Buprenorfina                      | 10      | Norbuprenorfina                 | 50      |
| Buprenorfina 3-D-Glucurónido      | 50      | Norbuprenorfina 3-D-glucurónido | 100     |
| BUPRENORFINA (BUP 5)              |         |                                 |         |
| Buprenorfina                      | 5       | Norbuprenorfina                 | 25      |
| Buprenorfina 3-D-Glucurónido      | 25      | Norbuprenorfina 3-D-glucurónido | 50      |
| COCAÍNA (COC 1,500)               |         |                                 |         |
| Benzoilecgonina                   | 1,500   | Cocaetileno                     | 100,000 |
| Cocaína HCl                       | 1,200   | Ecgonina                        | 150,000 |
| COCAÍNA (COC 300)                 |         |                                 |         |
| Benzoilecgonina                   | 300     | Cocaetileno                     | 20,000  |
| Cocaína HCl                       | 200     | Ecgonina                        | 30,000  |
| COCAÍNA (COC 200)                 |         |                                 |         |
| Benzoilecgonina                   | 200     | Cocaetileno                     | 13,500  |
| Cocaína HCl                       | 135     | Ecgonina                        | 20,000  |
| COCAÍNA (COC 150)                 |         |                                 |         |
| Benzoilecgonina                   | 150     | Cocaetileno                     | 10,000  |
| Cocaína HCl                       | 120     | Ecgonina                        | 15,000  |
| COCAÍNA (COC 100)                 |         |                                 |         |
| Benzoilecgonina                   | 100     | Cocaetileno                     | 7,000   |
| Cocaína HCl                       | 80      | Ecgonina                        | 10,000  |
| MARIHUANA (THC 300)               |         |                                 |         |
| Cannabinol                        | 200,000 | Δ <sup>8</sup> -THC             | 100,000 |
| 11-nor-Δ <sup>8</sup> -THC-9 COOH | 200     | Δ <sup>9</sup> -THC             | 100,000 |
| 11-nor-Δ <sup>9</sup> -THC-9 COOH | 300     |                                 |         |
| MARIHUANA (THC 200)               |         |                                 |         |
| Cannabinol                        | 140,000 | Δ <sup>8</sup> -THC             | 68,000  |
| 11-nor-Δ <sup>8</sup> -THC-9 COOH | 120     | Δ <sup>9</sup> -THC             | 68,000  |
| 11-nor-Δ <sup>9</sup> -THC-9 COOH | 200     |                                 |         |
| MARIHUANA (THC 150)               |         |                                 |         |
| Cannabinol                        | 100,000 | Δ <sup>8</sup> -THC             | 50,000  |
| 11-nor-Δ <sup>8</sup> -THC-9 COOH | 100     | Δ <sup>9</sup> -THC             | 50,000  |
| 11-nor-Δ <sup>9</sup> -THC-9 COOH | 150     |                                 |         |
| MARIHUANA (THC 50)                |         |                                 |         |
| Cannabinol                        | 35,000  | Δ <sup>8</sup> -THC             | 17,000  |
| 11-nor-Δ <sup>8</sup> -THC-9 COOH | 30      | Δ <sup>9</sup> -THC             | 17,000  |
| 11-nor-Δ <sup>9</sup> -THC-9 COOH | 50      |                                 |         |
| MARIHUANA (THC 30)                |         |                                 |         |
| Cannabinol                        | 20,000  | Δ <sup>8</sup> -THC             | 10,000  |
| 11-nor-Δ <sup>8</sup> -THC-9 COOH | 20      | Δ <sup>9</sup> -THC             | 10,000  |
| 11-nor-Δ <sup>9</sup> -THC-9 COOH | 30      |                                 |         |
| MARIHUANA (THC 25)                |         |                                 |         |
| Cannabinol                        | 17,500  | Δ <sup>8</sup> -THC             | 8,500   |
| 11-nor-Δ <sup>8</sup> -THC-9 COOH | 15      | Δ <sup>9</sup> -THC             | 8,500   |
| 11-nor-Δ <sup>9</sup> -THC-9 COOH | 25      |                                 |         |
| MARIHUANA (THC 20)                |         |                                 |         |
| Cannabinol                        | 14,000  | Δ <sup>8</sup> -THC             | 6,800   |
| 11-nor-Δ <sup>8</sup> -THC-9 COOH | 12      | Δ <sup>9</sup> -THC             | 6,800   |

|                                                 |        |                                     |         |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|
| 11-nor-Δ <sup>9</sup> -THC-9 COOH               | 20     |                                     |         |
| METADONA (MTD 300)                              |        |                                     |         |
| Metadona                                        | 300    | Doxilamina                          | 100,000 |
| METADONA (MTD 200)                              |        |                                     |         |
| Metadona                                        | 200    | Doxilamina                          | 65,000  |
| METANFETAMINA (MET 1, 000)                      |        |                                     |         |
| o-Hidroxi metanfetamina                         | 25,000 | (±)-3,4-Metilendioxi-metanfetamina  | 12,500  |
| D-Metanfetamina                                 | 1,000  | Mefentermina                        | 50,000  |
| L-Metanfetamina                                 | 20,000 |                                     |         |
| METANFETAMINA (MET 500)                         |        |                                     |         |
| o-Hidroxi metanfetamina                         | 12,500 | (±)-3,4-Metilendioxi-metanfetamina  | 6,250   |
| D-Metanfetamina                                 | 500    | Mefentermina                        | 25,000  |
| L-Metanfetamina                                 | 10,000 |                                     |         |
| METANFETAMINA (MET 300)                         |        |                                     |         |
| o-Hidroxi metanfetamina                         | 7,500  | (±)-3,4-Metilendioxi-metanfetamina  | 3,750   |
| D-Metanfetamina                                 | 300    | Mefentermina                        | 15,000  |
| L-Metanfetamina                                 | 6,000  |                                     |         |
| METANFETAMINA (MET 200)                         |        |                                     |         |
| o-Hidroxi metanfetamina                         | 5,000  | (±)-3,4-Metilendioxi-metanfetamina  | 2,500   |
| D-Metanfetamina                                 | 200    | Mefentermina                        | 10,000  |
| L-Metanfetamina                                 | 4,000  |                                     |         |
| METILENDIOXIMETANFETAMINA (MDMA 1, 000) Ecstasy |        |                                     |         |
| (±) 3,4-Methylenedioxy-methamphetamine HCl      | 1,000  | 3,4-Methylenedioxyethyl-amphetamine | 600     |
| (±) 3,4-Methylenedioxyampheta mine HCl          | 6,000  |                                     |         |
| METILENDIOXIMETANFETAMINA (MDMA 500) Ecstasy    |        |                                     |         |
| (±) 3,4-Methylenedioxy-methamphetamine HCl      | 500    | 3,4-Methylenedioxyethyl-amphetamine | 300     |
| (±) 3,4-Methylenedioxyam-phetamine HCl          | 3,000  |                                     |         |
| METILENDIOXIMETANFETAMINA (MDMA 300) Ecstasy    |        |                                     |         |
| (±) 3,4-Methylenedioxy-methamphetamine HCl      | 300    | 3,4-Methylenedioxyethyl-amphetamine | 180     |
| (±) 3,4-Methylenedioxyam-Phetamine HCl          | 1,800  |                                     |         |
| MORFINA (MOP/OPI 300)                           |        |                                     |         |
| Codeína                                         | 200    | Norcodeína                          | 6,000   |
| Levorfanol                                      | 1,500  | Normorfona                          | 50,000  |
| Morfina-3-β-D-glucurónido                       | 800    | Oxicodona                           | 30,000  |
| Etilmorfina                                     | 6,000  | Oximorfona                          | 50,000  |
| Hidrocodona                                     | 50,000 | Procaína                            | 15,000  |
| Hidromorfona                                    | 3,000  | Tebaina                             | 6,000   |
| 6-Monoacetilmorfina                             | 300    | Morfina                             | 300     |
| MORFINA (MOP/OPI 200)                           |        |                                     |         |
| Codeína                                         | 160    | Norcodeína                          | 4,000   |
| Levorfanol                                      | 1,000  | Normorfona                          | 40,000  |
| Morfina-3-β-D-glucurónido                       | 600    | Oxicodona                           | 20,000  |
| Etilmorfina                                     | 4,000  | Oximorfona                          | 40,000  |
| Hidrocodona                                     | 40,000 | Procaína                            | 10,000  |
| Hidromorfona                                    | 2,000  | Tebaina                             | 4,000   |
| 6-Monoacetilmorfina                             | 200    | Morfina                             | 200     |
| MORFINA (MOP/OPI 100)                           |        |                                     |         |
| Codeína                                         | 80     | Norcodeína                          | 2,000   |
| Levorfanol                                      | 500    | Normorfona                          | 20,000  |
| Morfina-3-β-D-glucurónido                       | 300    | Oxicodona                           | 10,000  |
| Etilmorfina                                     | 2,000  | Oximorfona                          | 20,000  |
| Hidrocodona                                     | 20,000 | Procaína                            | 5,000   |
| Hidromorfona                                    | 1,000  | Tebaina                             | 2,000   |
| 6-Monoacetilmorfina                             | 200    | Morfina                             | 100     |
| METACUALONA (MQL 300)                           |        |                                     |         |
| Metacualona                                     | 300    |                                     |         |
| MORFINA/OPIÁTICO (OPI 2,000)                    |        |                                     |         |
| Codeína                                         | 2,000  | Morfina                             | 2,000   |
| Etilmorfina                                     | 3,000  | Norcodeína                          | 25,000  |
| Hidrocodona                                     | 50,000 | Normorfona                          | 50,000  |
| Hidromorfona                                    | 15,000 | Oxicodona                           | 25,000  |
| Levorfanol                                      | 25,000 | Oximorfona                          | 25,000  |

|                                        |         |                            |         |
|----------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| 6-Monoacetilmorfina                    | 3,000   | Procaína                   | 50,000  |
| Morfina 3-β-D-glucurónido              | 2,000   | Tebaina                    | 25,000  |
| MORFINA/OPIÁTICO (OPI 1,000)           |         |                            |         |
| Codeína                                | 1,000   | Morfina                    | 1,000   |
| Etilmorfina                            | 1,500   | Norcodeína                 | 12,500  |
| Hidrocodona                            | 25,000  | Normorfona                 | 25,000  |
| Hidromorfona                           | 7,500   | Oxicodona                  | 12,500  |
| Levorfanol                             | 12,500  | Oximorfona                 | 12,500  |
| 6-Monoacetilmorfina                    | 1,500   | Procaína                   | 25,000  |
| Morfina 3-β-D-glucurónido              | 1,000   | Tebaina                    | 12,500  |
| MORFINA/OPIÁTICO (OPI 500)             |         |                            |         |
| Codeína                                | 500     | Morfina                    | 500     |
| Etilmorfina                            | 750     | Norcodeína                 | 6,250   |
| Hidrocodona                            | 12,500  | Normorfona                 | 12,500  |
| Hidromorfona                           | 3,750   | Oxicodona                  | 6,250   |
| Levorfanol                             | 6,250   | Oximorfona                 | 6,250   |
| 6-Monoacetilmorfina                    | 750     | Procaína                   | 12,500  |
| Morfina 3-β-D-glucurónido              | 500     | Tebaina                    | 6,250   |
| MEPERIDINA (MPRD 100)                  |         |                            |         |
| Normeperidina                          | 100     | Meperidina                 | 100     |
| FENCICLIDINA (PCP 50)                  |         |                            |         |
| Fenciclidina                           | 50      | 4-Hidroxifenciclidina      | 25,000  |
| PHENCYCLIDINE (PCP 25)                 |         |                            |         |
| Fenciclidina                           | 25      | 4-Hidroxifenciclidina      | 12,500  |
| PROPOXIFENO (PPX 300)                  |         |                            |         |
| D-propoxifeno                          | 300     | D-norpropoxifeno           | 300     |
| ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS (TCA 1,000) |         |                            |         |
| Nortriptilina                          | 1,000   | Imipramina                 | 400     |
| Nordoxepina                            | 500     | Clomipramina               | 50,000  |
| Trimipramina                           | 3,000   | Doxepina                   | 2,000   |
| Amitriptilina                          | 1,500   | Maprotilina                | 2,000   |
| Promazina                              | 3,000   | Prometazina                | 50,000  |
| Desipramina                            | 200     | Perfenazina                | 50,000  |
| Ciclobenzaprina                        | 2,000   | Ditiaden                   | 10,000  |
| ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS (TCA 500)   |         |                            |         |
| Nortriptilina                          | 500     | Imipramina                 | 200     |
| Nordoxepina                            | 250     | Clomipramina               | 25,000  |
| Trimipramina                           | 1,500   | Doxepina                   | 1,000   |
| Amitriptilina                          | 750     | Maprotilina                | 1,000   |
| Promazina                              | 1,500   | Prometazina                | 25,000  |
| Desipramina                            | 100     | Perfenazina                | 25,000  |
| Ciclobenzaprina                        | 1,000   | Ditiaden                   | 5,000   |
| ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS (TCA 300)   |         |                            |         |
| Nortriptilina                          | 300     | Imipramina                 | 120     |
| Nordoxepina                            | 150     | Clomipramina               | 15,000  |
| Trimipramina                           | 900     | Doxepina                   | 600     |
| Amitriptilina                          | 450     | Maprotilina                | 600     |
| Promazina                              | 900     | Prometazina                | 15,000  |
| Desipramina                            | 60      | Perfenazina                | 15,000  |
| Ciclobenzaprina                        | 600     | Ditiaden                   | 3,000   |
| TRAMADOL (TML 100)                     |         |                            |         |
| n-Desmetil-cis-tramadol                | 200     | o-Desmetil-cis-tramadol    | 10,000  |
| Cis-tramadol                           | 100     | Fenciclidina               | 100,000 |
| Prociclidina                           | 100,000 | d,l-O-Desmetil venlafaxina | 50,000  |
| TRAMADOL (TML 200)                     |         |                            |         |
| n-Desmetil-cis-tramadol                | 400     | o-Desmetil-cis-tramadol    | 20,000  |
| Cis-tramadol                           | 200     | Fenciclidina               | 200,000 |
| Prociclidina                           | 200,000 | d,l-O-Desmetil venlafaxina | 100,000 |
| TRAMADOL (TML 300)                     |         |                            |         |
| n-Desmetil-cis-tramadol                | 600     | o-Desmetil-cis-tramadol    | 30,000  |
| Cis-tramadol                           | 300     | Fenciclidina               | 300,000 |
| Prociclidina                           | 300,000 | d,l-O-Desmetil venlafaxina | 150,000 |
| TRAMADOL (TML 500)                     |         |                            |         |
| n-Desmetil-cis-tramadol                | 1,000   | o-Desmetil-cis-tramadol    | 50,000  |
| Cis-tramadol                           | 500     | Fenciclidina               | 500,000 |
| Prociclidina                           | 500,000 | d,l-O-Desmetil venlafaxina | 250,000 |

| KETAMINE (KET 1, 000)   |         |                                      |         |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| Ketamina                | 1,000   | Benzfetamina                         | 25,000  |
| Dextrometorfano         | 2,000   | (+) Clorfeniramina                   | 25,000  |
| Metoxifenamina          | 25,000  | Clonidina                            | 100,000 |
| d-Norpropoxifeno        | 25,000  | EDDP                                 | 50,000  |
| Promazina               | 25,000  | 4-Hidroxifenciclidina                | 50,000  |
| Prometazina             | 25,000  | Levorfanol                           | 50,000  |
| Pentazocina             | 25,000  | MDE                                  | 50,000  |
| Fenciclidina            | 25,000  | Meperidina                           | 25,000  |
| Tetrahidrozolina        | 500     | d-Metanfetamina                      | 50,000  |
| Mefentermina            | 25,000  | l-Metanfetamina                      | 50,000  |
| (1R, 2S) - (-)-Efedrina | 100,000 | 3,4-Metilendioximetanfetamina (MDMA) | 100,000 |
| Disopiramida            | 25,000  | Tioridazina                          | 50,000  |
| KETAMINE (KET 500)      |         |                                      |         |
| Ketamina                | 500     | Benzfetamina                         | 12,500  |
| Dextrometorfano         | 1,000   | (+) Clorfeniramina                   | 12,500  |
| Metoxifenamina          | 12,500  | Clonidina                            | 50,000  |
| d-Norpropoxifeno        | 12,500  | EDDP                                 | 25,000  |
| Promazina               | 12,500  | 4-Hidroxifenciclidina                | 25,000  |
| Prometazina             | 12,500  | Levorfanol                           | 25,000  |
| Pentazocina             | 12,500  | MDE                                  | 25,000  |
| Fenciclidina            | 12,500  | Meperidina                           | 12,500  |
| Tetrahidrozolina        | 250     | d-Metanfetamina                      | 25,000  |
| Mefentermina            | 12,500  | l-Metanfetamina                      | 25,000  |
| (1R, 2S) - (-)-Efedrina | 50,000  | 3,4-Metilendioximetanfetamina (MDMA) | 50,000  |
| Disopiramida            | 12,500  | Tioridazina                          | 25,000  |
| KETAMINA (KET 300)      |         |                                      |         |
| Ketamina                | 300     | Benzfetamina                         | 6,250   |
| Dextrometorfano         | 600     | (+) Clorfeniramina                   | 6,250   |
| Metoxifenamina          | 6,250   | Clonidina                            | 30,000  |
| d-Norpropoxifeno        | 6,250   | EDDP                                 | 15,000  |
| Promazina               | 6,250   | 4-Hidroxifenciclidina                | 15,000  |
| Prometazina             | 6,250   | Levorfanol                           | 15,000  |
| Pentazocina             | 6,250   | MDE                                  | 15,000  |
| Fenciclidina            | 6,250   | Meperidina                           | 6,250   |
| Tetrahidrozolina        | 150     | d-Metanfetamina                      | 15,000  |
| Mefentermina            | 6,250   | l-Metanfetamina                      | 15,000  |
| (1R, 2S) - (-)-Efedrina | 30,000  | 3,4-Metilendioximetanfetamina (MDMA) | 30,000  |
| Disopiramida            | 6,250   | Tioridazina                          | 15,000  |
| KETAMINE (KET 100)      |         |                                      |         |
| Ketamina                | 100     | Benzfetamina                         | 2,000   |
| Dextrometorfano         | 200     | (+) Clorfeniramina                   | 2,000   |
| Metoxifenamina          | 2,000   | Clonidina                            | 10,000  |
| d-Norpropoxifeno        | 2,000   | EDDP                                 | 5,000   |
| Promazina               | 2,000   | 4-Hidroxifenciclidina                | 5,000   |
| Prometazina             | 2,000   | Levorfanol                           | 5,000   |
| Pentazocina             | 2,000   | MDE                                  | 5,000   |
| Fenciclidina            | 2,000   | Meperidina                           | 2,000   |
| Tetrahidrozolina        | 50      | d-Metanfetamina                      | 5,000   |
| Mefentermina            | 2,000   | l-Metanfetamina                      | 5,000   |
| (1R, 2S) - (-)-Efedrina | 10,000  | Tioridazina                          | 5,000   |
| Disopiramida            | 2,000   | 3,4-Metilendioximetanfetamina (MDMA) | 10,000  |
| OXICODONA (OXY 300)     |         |                                      |         |
| Oxicodona               | 300     | Hidromorfona                         | 150,000 |
| Oximorfona              | 900     | Naloxona                             | 75,000  |
| Levorfanol              | 15,000  | Naltrexona                           | 75,000  |
| Hidrocodona             | 75,000  |                                      |         |
| OXICODONA (OXY 100)     |         |                                      |         |
| Oxicodona               | 100     | Hidromorfona                         | 50,000  |
| Oximorfona              | 300     | Naloxona                             | 25,000  |
| Levorfanol              | 50,000  | Naltrexona                           | 25,000  |
| Hidrocodona             | 25,000  |                                      |         |

| COTININA (COT 300)                                        |          |                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| (-)-Cotinina                                              | 300      | (-)-Nicotina              | 7,500    |
| COTININA (COT 200)                                        |          |                           |          |
| (-)-Cotinina                                              | 200      | (-)-Nicotina              | 5,000    |
| COTININA (COT 100)                                        |          |                           |          |
| (-)-Cotinina                                              | 100      | (-)-Nicotina              | 2,500    |
| COTININA (COT 500)                                        |          |                           |          |
| (-)-Cotinina                                              | 500      | (-)-Nicotina              | 12,500   |
| COTININA (COT 50)                                         |          |                           |          |
| (-)-Cotinina                                              | 50       | (-)-Nicotina              | 1,250    |
| COTININA (COT 10)                                         |          |                           |          |
| (-)-Cotinina                                              | 10       | (-)-Nicotina              | 250      |
| 2-ETILIDENO-1,5-DIMETIL-3,3-DIFENILPIRROLIDINA (EDDP 300) |          |                           |          |
| 2-Etilideno-1,5-Dimetil-3,3-Difenilpirrolidina (EDDP)     |          |                           | 300      |
| 2-ETILIDENO-1,5-DIMETIL-3,3-DIFENILPIRROLIDINA(EDDP 100)  |          |                           |          |
| 2-Etilideno-1,5-Dimetil-3,3-Difenilpirrolidina (EDDP)     |          |                           | 100      |
| MARIHUANA SINTÉTICA (K2-50)                               |          |                           |          |
| JWH-018 Ácido 5-pentanoico                                | 50       | JWH-073 Ácido 4-butanoico | 50       |
| JWH-018 4-Hidroxipentilo                                  | 400      | JWH-018 5-Hidroxipentilo  | 500      |
| JWH-073 4-Hidroxibutio                                    | 500      |                           |          |
| MARIHUANA SINTÉTICA (K2-30)                               |          |                           |          |
| JWH-018 Ácido 5-pentanoico                                | 30       | JWH-073 Ácido 4-butanoico | 30       |
| JWH-018 4-Hidroxipentilo                                  | 250      | JWH-018 5-Hidroxipentilo  | 300      |
| JWH-073 4-Hidroxibutio                                    | 300      |                           |          |
| MARIHUANA SINTÉTICA (K2-25)                               |          |                           |          |
| JWH-018 Ácido 5-pentanoico                                | 25       | JWH-073 Ácido 4-butanoico | 25       |
| JWH-018 4-Hidroxipentilo                                  | 200      | JWH-018 5-Hidroxipentilo  | 250      |
| JWH-073 4-Hidroxibutio                                    | 250      |                           |          |
| 6-MONOACETILMORFINA (6-MAM 10)                            |          |                           |          |
| 6-Monoacetilmorfina                                       | 10       | Morfina                   | 100,000  |
| (±) 3, 4-METILENDIOXIANFETAMINA (MDA 500)                 |          |                           |          |
| (±)3,4-Metilendioxi anfetamina                            | 500      | Metoxifenamina            | 6,000    |
|                                                           |          | D-anfetamina              | 2,000    |
| Sulfato de D,L-anfetamina                                 | 300      | Fentermina                | 1,000    |
| L-anfetamina                                              | 25,000   | Maprotilina               | 50,000   |
| ETIL-β-D-GLUCURONIDA (ETG 300)                            |          |                           |          |
| Etil-β-D-Glucurónido                                      | 300      | Propilo β-D-glucurónido   | 30,000   |
| Morfina 3β-Glucurónido                                    | 60,000   | Morfina 6β-glucurónido    | 60,000   |
| Ácido Glucurónico                                         | 60,000   | Etanol                    | >100,000 |
| Metanol                                                   | >100,000 |                           |          |
| ETIL-β-D-GLUCURONIDA (ETG 500)                            |          |                           |          |
| Etil-β-D-Glucurónido                                      | 500      | Propilo β-D-glucurónido   | 50,000   |
| Morfina 3β-Glucurónido                                    | 100,000  | Morfina 6β-glucurónido    | 100,000  |
| Ácido Glucurónico                                         | 100,000  | Etanol                    | >100,000 |
| Metanol                                                   | >100,000 |                           |          |
| ETIL-β-D-GLUCURONIDA (ETG 1,000)                          |          |                           |          |
| Etil-β-D-Glucurónido                                      | 1,000    | Propilo β-D-glucurónido   | 100,000  |
| Morfina 3β-Glucurónido                                    | >100,000 | Morfina 6β-glucurónido    | >100,000 |
| Ácido Glucurónico                                         | >100,000 | Etanol                    | >100,000 |
| Metanol                                                   | >100,000 |                           |          |
| ETIL-β-D-GLUCURONIDA (ETG 1,500)                          |          |                           |          |
| Etil-β-D-Glucurónido                                      | 1,500    | Propilo β-D-glucurónido   | 150,000  |
| Morfina 3β-Glucurónido                                    | >100,000 | Morfina 6β-glucurónido    | >100,000 |
| Ácido Glucurónico                                         | >100,000 | Etanol                    | >100,000 |
| Metanol                                                   | >100,000 |                           |          |
| CLONAZEPAM (CLO 400)                                      |          |                           |          |
| Clonazepam                                                | 400      | Flunitrazepam             | 300      |
| Alprazolam                                                | 200      | (±)lorazepam              | 1,250    |
| a-hidroxiaprazolam                                        | 2,000    | RS-lorazepamglucurónido   | 250      |
| Bromazepam                                                | 1,000    | Midazolam                 | 5,000    |
| Clordiazepóxido                                           | 1,000    | Nitrazepam                | 200      |
| Clobazam                                                  | 250      | Norclordiazepóxido        | 200      |
| Clorazepatedipotasio                                      | 600      | Nordiazepam               | 1,000    |
| Delorazepam                                               | 1,000    | Oxazepam                  | 350      |
| Desalquiflurazepam                                        | 250      | Temazepam                 | 150      |
| Diazepam                                                  | 300      | Triazolam                 | 5,000    |

| Estazolam                                   | 1,250 |                             |         |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------|
| CLONAZEPAM (CLO 150)                        |       |                             |         |
| Clonazepam                                  | 150   | Flunitrazepam               | 120     |
| Alprazolam                                  | 75    | (±)lorazepam                | 500     |
| a-hidroxiaprazolam                          | 750   | RS-lorazepamglucurónido     | 100     |
| Bromazepam                                  | 400   | Midazolam                   | 2,000   |
| Clordiazepóxido                             | 400   | Nitrazepam                  | 75      |
| Clobazam                                    | 100   | Norclordiazepóxido          | 75      |
| Clorazepatedipotasio                        | 250   | Nordiazepam                 | 400     |
| Delorazepam                                 | 400   | Oxazepam                    | 130     |
| Desalquiflurazepam                          | 100   | Temazepam                   | 60      |
| Diazepam                                    | 120   | Triazolam                   | 2,000   |
| Estazolam                                   | 500   |                             |         |
| DIETILAMIDA DEL ÁCIDO LISÉRGICO (LSD 10)    |       |                             |         |
| Dietilamida del Ácido Lisérgico             | 10    |                             |         |
| DIETILAMIDA DEL ÁCIDO LISÉRGICO (LSD 20)    |       |                             |         |
| Dietilamida del Ácido Lisérgico             | 20    |                             |         |
| DIETILAMIDA DEL ÁCIDO LISÉRGICO (LSD 50)    |       |                             |         |
| Dietilamida del Ácido Lisérgico             | 50    |                             |         |
| METILFENIDATO (MPD 300)                     |       |                             |         |
| Metilfenidato (Ritalin)                     | 300   | Ácido Ritalínico            | 1,000   |
| METILFENIDATO (MPD 150)                     |       |                             |         |
| Metilfenidato (Ritalin)                     | 150   | Ácido Ritalínico            | 500     |
| METILFENIDATO (MPD 1,000)                   |       |                             |         |
| Metilfenidato (Ritalin)                     | 350   | Ácido Ritalínico            | 1,000   |
| ZOLPIDEM (ZOL 50)                           |       |                             |         |
| Zolpidem                                    | 50    |                             |         |
| ZOLPIDEM (ZOL 25)                           |       |                             |         |
| Zolpidem                                    | 25    |                             |         |
| MEFEDRONA (MEP 500)                         |       |                             |         |
| Mefedrona HCl                               | 500   | R(+)-Metcatinona HCl        | 7,500   |
| S(-)-Metcatinona HCl                        | 2,500 | 3-Fluorometcatinona HCl     | 7,500   |
| 4-Fluorometcatinona HCl                     | 1,500 | Metoxifenamina              | 100,000 |
| MEFEDRONA (MEP 100)                         |       |                             |         |
| Mefedrona HCl                               | 100   | R(+)-Metcatinona HCl        | 1,500   |
| S(-)-Metcatinona HCl                        | 500   | 3-Fluorometcatinona HCl     | 1,500   |
| 4-Fluorometcatinona HCl                     | 300   | Metoxifenamina              | 100,000 |
| 3, 4-METILENODIOXIPIROVALERONA (MDPV 1,000) |       |                             |         |
| 3, 4- metilendioxi-pirovalerona             | 1,000 |                             |         |
| 3, 4-METILENODIOXIPIROVALERONA (MDPV 500)   |       |                             |         |
| 3, 4- metilendioxi-pirovalerona             | 500   |                             |         |
| 3, 4-METILENODIOXIPIROVALERONA (MDPV 300)   |       |                             |         |
| 3, 4- metilendioxi-pirovalerona             | 300   |                             |         |
| DIAZEPAM(DIA 300)                           |       |                             |         |
| Diazepam                                    | 300   | Midazolam                   | 6,000   |
| Clobazam                                    | 200   | Nitrazepam                  | 200     |
| Clonazepam                                  | 500   | Norclordiazepóxido          | 100     |
| Clorazepato dipotásico                      | 500   | Nordiazepam                 | 900     |
| Alprazolam                                  | 100   | Flunitrazepam               | 200     |
| a-hidroxiaprazolam                          | 1,500 | (±)lorazepam                | 3,000   |
| Bromazepam                                  | 900   | RS-glucurónido de lorazepam | 200     |
| Clordiazepóxido                             | 900   | Triazolam                   | 3,000   |
| Estazolam                                   | 6,000 | Temazepam                   | 100     |
| Delorazepam                                 | 900   | Oxazepam                    | 300     |
| Desalquiflurazepam                          | 200   |                             |         |
| DIAZEPAM (DIA 200)                          |       |                             |         |
| Diazepam                                    | 200   | Midazolam                   | 4,000   |
| Clobazam                                    | 120   | Nitrazepam                  | 120     |
| Clonazepam                                  | 300   | Norclordiazepóxido          | 70      |
| Clorazepato dipotásico                      | 300   | Nordiazepam                 | 600     |
| Alprazolam                                  | 70    | Flunitrazepam               | 120     |
| a-hidroxiaprazolam                          | 1,000 | (±)lorazepam                | 2,000   |
| Bromazepam                                  | 600   | RS-glucurónido de lorazepam | 120     |
| Clordiazepóxido                             | 600   | Triazolam                   | 2,000   |
| Estazolam                                   | 4,000 | Temazepam                   | 70      |
| Delorazepam                                 | 600   | Oxazepam                    | 200     |
| Desalquiflurazepam                          | 120   |                             |         |
| ZOPICLONA (ZOP 300)                         |       |                             |         |
| Zopiclona-x-óxido                           | 300   | Zopiclona                   | 300     |

| ZOPICLONA (ZOP 50)                  |         |                                      |        |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| Zopiclona-x-óxido                   | 50      | Zopiclona                            | 50     |
| METCATINONA (MCAT 500)              |         |                                      |        |
| S(-)-metcatinona HCl                | 500     | R(+)-Metcatinona HCl                 | 1,500  |
| metoxifenamina                      | 100,000 | 3-Fluorometcatinona HCl              | 1,500  |
| 7-AMINOCLONAZEPAM (7-ACL 300)       |         |                                      |        |
| a-hidroxiaprazolam                  | 6,000   | Flunitrazepam                        | 3,000  |
| Bromazepam                          | 6,000   | RS-glucurónido de lorazepam          | 2,700  |
| Clordiazepóxido                     | 6,000   | Norclordiazepóxido                   | 4,500  |
| Clobazam                            | 9,000   | Nordiazepam                          | 15,000 |
| Clonazepam                          | 2,400   | Temazepam                            | 9,000  |
| Delorazepam                         | 6,000   | 7-Aminoclonazepam                    | 300    |
| Desalquilflurazepam                 | 6,000   |                                      |        |
| 7-AMINOCLONAZEPAM (7-ACL 200)       |         |                                      |        |
| a-hidroxiaprazolam                  | 4,000   | Flunitrazepam                        | 2,000  |
| Bromazepam                          | 4,000   | RS-Glucurónido de lorazepam          | 1,800  |
| Clordiazepóxido                     | 4,000   | Norclordiazepóxido                   | 3,000  |
| Clobazam                            | 6,000   | Nordiazepam                          | 10,000 |
| Clonazepam                          | 1,600   | Temazepam                            | 6,000  |
| Delorazepam                         | 4,000   | 7-Aminoclonazepam                    | 200    |
| Desalquilflurazepam                 | 4,000   |                                      |        |
| 7-AMINOCLONAZEPAM (7-ACL100)        |         |                                      |        |
| a-hydroxyalprazolam                 | 2,000   | Flunitrazepam                        | 1,000  |
| Bromazepam                          | 2,000   | RS-Glucurónido de lorazepam          | 900    |
| Chlordiazepoxide                    | 2,000   | Norclordiazepóxido                   | 1,500  |
| Clobazam                            | 3,000   | Nordiazepam                          | 5,000  |
| Clonazepam                          | 800     | Temazepam                            | 3,000  |
| Delorazepam                         | 2,000   | 7-Aminoclonazepam                    | 100    |
| Desalkylflurazepam                  | 2,000   |                                      |        |
| CARFENTANILO (CFYL 500)             |         |                                      |        |
| Carventanilo                        | 500     | Fentanilo                            | 100    |
| Sufentanilo                         | 50,000  | Remifentanilo                        | 10,000 |
| (±)cis-3-Mentilfentanilo            | 20,000  | Butilfentanilo                       | 150    |
| CARFENTANILO (CFYL 250)             |         |                                      |        |
| Carventanilo                        | 250     | Fentanilo                            | 50     |
| Sufentanilo                         | 25,000  | Remifentanilo                        | 5,000  |
| (±)cis-3-Mentilfentanilo            | 10,000  | Butilfentanilo                       | 75     |
| CAFEÍNA (CAF 1,000)                 |         |                                      |        |
| Cafeína                             | 1,000   |                                      |        |
| CATHINE (CAT 150)                   |         |                                      |        |
| (+)-Norpseudoefedrina HCl (Cathine) | 150     | (+)-3,4-Metilendioxfanfetamina (MDA) | 100    |
| d/l-Anfetamina                      | 100     | p-Hidroxianfetamina                  | 100    |
| Triptamina                          | 12,500  | Metoxifenamina                       | 12,500 |
| TROPICAMIDA (TRO 350)               |         |                                      |        |
| Tropicamida                         | 350     |                                      |        |
| ALPRAZOLAM (ALP 100)                |         |                                      |        |
| Benzodiazepinas                     | 300     | Flunitrazepam                        | 200    |
| a-hidroxiaprazolam                  | 1,500   | (±) Lorazepam                        | 3,000  |
| Bromazepam                          | 900     | RS-lorazepamglucurónido              | 200    |
| Clordiazepóxido                     | 900     | Midazolam                            | 6,000  |
| Clobazam                            | 200     | Nitrazepam                           | 200    |
| Clonazepam                          | 500     | Norclordiazepóxido                   | 100    |
| Clorazepatedipotasio                | 500     | Nordiazepam                          | 900    |
| Delorazepam                         | 900     | Oxazepam                             | 300    |
| Desalquilflurazepam                 | 200     | Temazepam                            | 100    |
| Diazepam                            | 300     | Triazolam                            | 3,000  |
| Estazolam                           | 6,000   | Alprazolam                           | 100    |
| PREGABALINA (PGB 50,000)            |         |                                      |        |
| Pregabalina                         | 50,000  |                                      |        |
| PREGABALINA (PGB 500)               |         |                                      |        |
| Pregabalina                         | 500     |                                      |        |
| Zaleplón (ZAL 100)                  |         |                                      |        |
| Zaleplón                            | 100     |                                      |        |
| CANNABINOL (CNB 500)                |         |                                      |        |
| Cannabinol                          | 500     | Δ <sup>9</sup> -THC                  | 10,000 |
| 11-nor-Δ <sup>9</sup> -THC-9 COOH   | 300     |                                      |        |
| GABAPENTINA (GAB 2,000)             |         |                                      |        |

| Gabapentina                                            | 2,000   |                               |           |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|
| Trazodona (TZD 200)                                    |         |                               |           |
| Trazodona                                              | 200     |                               |           |
| CARISOPRODOL (CAR 2,000)                               |         |                               |           |
| Carisoprodol                                           | 2,000   |                               |           |
| CARISOPRODOL (CAR 1,000)                               |         |                               |           |
| Carisoprodol                                           | 1,000   |                               |           |
| CARISOPRODOL (CAR 500)                                 |         |                               |           |
| Carisoprodol                                           | 500     |                               |           |
| AB-PINACA/K3 (ABP 10)                                  |         |                               |           |
| AB-PINACA                                              | 10      | AB-PINACA 5-pentanoico        | 10        |
| AB-PINACA 5-hidroxiptilto                              | 10      | AB-FUBINACA                   | 10        |
| AB-PINACA 4-hidroxiptilto                              | 10,000  | UR-144 5-pentanoico           | 5,000     |
| UR-144 5-hidroxiptilto                                 | 10,000  | UR-144 4-hidroxiptilto        | 10,000    |
| APINACA 5-hidroxiptilto                                | 10,000  | Acido pentanoico ADB-PINACA   | 10        |
| ADB-PINACA                                             |         | 5-fluoroAB-PINACA             |           |
| N-(5-hidroxiptilto)                                    | 30      | N-(4-hidroxiptilto)           | 30        |
| 5-fluoro AB-PINACA                                     | 25      |                               |           |
| UR-144/K4 (25)                                         |         |                               |           |
| UR-144 Ácido 5-pentanoico                              | 25      | UR-144 4-hidroxiptilto        | 10,000    |
| UR-144 5-hidroxiptilto                                 | 5,000   | XLR-11 4-hidroxiptilto        | 2,000     |
| 5-fluoro                                               | 10,000  | ADB-PINAC N-(4-hidroxiptilto) | >10,000   |
| AB-Pinaca N-(4-hidroxiptilto)                          | >10,000 |                               |           |
| QUETIAPINA (QTP 1,000)                                 |         |                               |           |
| Quetiapina                                             | 1,000   | Norquetiapine                 | 10,000    |
| FLUOXETINA (FLX 500)                                   |         |                               |           |
| Fluoxetina                                             | 500     |                               |           |
| KRATOM (KRA 300)                                       |         |                               |           |
| Mitraginina                                            | 300     | 7-hidroxitmitraginina         | >50,000   |
| TILIDINA (TLD 50)                                      |         |                               |           |
| Nortilidina                                            | 50      | Tilidina                      | 100       |
| Alfa-Pirrolidinovalerofenona (α-PVP 2,000)             |         |                               |           |
| Alfa-Pirrolidinovalerofenona                           | 2,000   |                               |           |
| ALFA-PIRROLIDINOVALEROFENONA (α-PVP 1,000)             |         |                               |           |
| Alfa-Pirrolidinovalerofenona                           | 1,000   |                               |           |
| ALFA-PIRROLIDINOVALEROFENONA (α-PVP 500)               |         |                               |           |
| Alfa-Pirrolidinovalerofenona                           | 500     |                               |           |
| ALFA-PIRROLIDINOVALEROFENONA (α-PVP 300)               |         |                               |           |
| Alfa-Pirrolidinovalerofenona                           | 300     |                               |           |
| MESCALINE (MES 100)                                    |         |                               |           |
| Mescalina                                              | 100     |                               |           |
| MESCALINE (MES 300)                                    |         |                               |           |
| Mescalina                                              | 300     |                               |           |
| PAPAVERINA (PAP 500)                                   |         |                               |           |
| Papaverina                                             | 500     | Diflunisal                    | 1,000,000 |
| Metortrexato                                           | 65,000  | Metedrona                     | 500,000   |
| Pragabin                                               | 500,000 | Fenelzina                     | 8,000     |
| Quinina                                                | 4,000   |                               |           |
| TAPENTADOL (TAP 1,000)                                 |         |                               |           |
| 3-((1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil)fenol | 1,000   |                               |           |
| CITALOPRAM (CIT 500)                                   |         |                               |           |
| Desmetilcitalopram                                     | 500     |                               |           |
| F-KETAMINA (FKET 1,000)                                |         |                               |           |
| 2-(2-fluorfenil)-2-metilamino-ciclohexanona            | 1,000   |                               |           |
| RISPERIDONA (RPD 150)                                  |         |                               |           |
| Risperidona                                            | 150     |                               |           |
| ESCOPOLAMINA (SCOP 500)                                |         |                               |           |
| Escopolamina                                           | 500     | Atropina                      | 8,000     |
| N, N-DIMETILTRIPTAMINA (NND 1,000)                     |         |                               |           |
| N, N-Dimetilriptamina                                  | 1,000   |                               |           |
| MIRTAZAPINA (MTZ 500)                                  |         |                               |           |
| N-Desmetilmirtazapina                                  | 500     | Escopolamina                  | 500       |
| OLANZAPINA (OZP 1,000)                                 |         |                               |           |
| Olanzapina                                             | 1,000   |                               |           |
| FENTANILO (FYL 20)                                     |         |                               |           |
| Alfentanyl                                             | 600,000 | Buspirone                     | 15,000    |
| Fenfluramine                                           | 50,000  | Fentanyl                      | 100       |

| Norfentanyl            | 20       | Sufentanyl                | 50,000  |
|------------------------|----------|---------------------------|---------|
| Paliperidona           | 1,250    | Risperidona               | 5,000   |
| FENTANILO (FYL 10)     |          |                           |         |
| Alfentanyl             | 300,000  | Buspirone                 | 8,000   |
| Fenfluramine           | 25,000   | Fentanyl                  | 50      |
| Norfentanyl            | 10       | Sufentanyl                | 25,000  |
| Paliperidona           | 500      | Risperidona               | 2,500   |
| FENTANILO (FYL 100)    |          |                           |         |
| Alfentanyl             | 600,000  | Buspirone                 | 15,000  |
| Fenfluramine           | 50,000   | Fentanyl                  | 100     |
| Norfentanyl            | 20       | Sufentanyl                | 50,000  |
| FENTANILO (FYL 200)    |          |                           |         |
| Alfentanyl             | >600,000 | Buspirone                 | 30,000  |
| Fenfluramine           | 100,000  | Fentanyl                  | 200     |
| Norfentanyl            | 40       | Sufentanyl                | 100,000 |
| FENTANILO (FYL 300)    |          |                           |         |
| Alfentanyl             | >600,000 | Buspirone                 | 80,000  |
| Norfentanyl            | 60       | Fentanyl                  | 300     |
| Fenfluramine           | 150,000  | Sufentanyl                | 150,000 |
| HIDROMORFINA (HMO 500) |          |                           |         |
| Hidromorfina           | 500      | Morfina                   | 200     |
| Codeína                | 120      | Etilmorfina               | 120     |
| Criptona de hidrógeno  | 500      | Morfina 3-β-D-glucurónico | 250     |
| Levofenol              | 2,000    | Oxicodona                 | 125,000 |
| Demerpina              | 125,000  | Ir a Codeína              | 31,200  |
| Hidroxi morfina        | 125,000  | Naloxona                  | 50,000  |
| Thebaine               | 10,000   | Diacetomorfina (heroína)  | 250     |
| 6-monoacetilmorfina    | 120      |                           |         |
| HIDROMORFINA (HMO 300) |          |                           |         |
| Hidromorfina           | 300      | Morfina                   | 120     |
| Codeína                | 75       | Etilmorfina               | 75      |
| Criptona de hidrógeno  | 300      | Morfina 3-β-D-glucurónico | 150     |
| Levofenol              | 1,200    | Oxicodona                 | 75,000  |
| Demerpina              | 75,000   | Ir a Codeína              | 18,700  |
| Hidroxi morfina        | 75,000   | Naloxona                  | 30,000  |
| Thebaine               | 6,000    | Diacetomorfina (heroína)  | 150     |
| 6-monoacetilmorfina    | 75       |                           |         |
| HIDROMORFINA (HMO 250) |          |                           |         |
| Hidromorfina           | 250      | Morfina                   | 100     |
| Codeína                | 60       | Etilmorfina               | 60      |
| Criptona de hidrógeno  | 250      | Morfina 3-β-D-glucurónico | 125     |
| Levofenol              | 1,000    | Oxicodona                 | 62,500  |
| Demerpina              | 62,500   | Ir a Codeína              | 15,600  |
| Hidroxi morfina        | 62,500   | Naloxona                  | 25,000  |
| Thebaine               | 5,000    | Diacetomorfina (heroína)  | 125     |
| 6-monoacetilmorfina    | 60       |                           |         |

Efecto de la densidad de la orina

Quince (15) muestras de orina con rangos de densidad normal, alta y baja (1.005-1.045) se mezclaron con drogas con niveles del 50% por debajo y del 50% por encima de los niveles del cut-off, respectivamente. El test Multidrogas en Panel se probó en duplicado usando las 15 muestras de orina libres de droga y también cuando se las añadió la droga y los resultados demostraron que la variación en el rango de la densidad de la orina no afectaba a los resultados del test.

Efecto del pH de la orina

Se ajustó el pH de cantidades alícuotas de muestras de orina negativas en un rango de 5 a 9, con incrementos de 1 unidad del pH, y se las añadió droga al 50% por debajo y 50% por encima de los niveles del cut-off. Se probaron con el test Mutidrogas en Panel en cada pH ajustado y los resultados demostraron que la variación del rango del pH no interfiere con los resultados del test.

Reactividad Cruzada

Se realizó un estudio para determinar la reactividad cruzada de la prueba con compuestos en orina libre de drogas o en orina positiva para drogas que contenía las sustancias calibradoras anteriores. Los siguientes compuestos no muestran reactividad cruzada cuando se analizan con la prueba rápida multidrogas a una concentración de 100 µg/mL.

Compuestos que no presentan reactividad cruzada

Acetofenetidina      Cortisona      Zomepirac      Quinidina

|                        |                          |                  |                     |
|------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| N-Acetilprocainamida   | Creatinina               | Ketoprofeno      | Quinina             |
| Ácido acetilsalicílico | Desoxicorticosterona     | Labetalol        | Ácido salicílico    |
| Aminopirina            | Dextrometorfano          | Loperamida       | Serotonina          |
| Amoxicilina            | Diclofenaco              | Meprobamato      | Sulfametazina       |
| Ampicilina             | Diffunisal               | Isoxsuprina      | Sulindac            |
| Ácido l-ascórbico      | Digoxina                 | d,l-Propranolol  | Tetraciclina        |
| Apomorfina             | Difenhidramina           | Ácido nalidíxico | Tetrahydrocortisona |
| Aspartamo              | p-aminobenzoato de etilo | Naproxeno        | 3-acetato           |
| Atropina               | β-Estradiol              | Niacinamida      | Tetrahydrocortisona |
| Ácido bencílico        | Estrona-3-sulfato        | Nifedipina       | Tetrahidrozolina    |
| Ácido benzoico         | Eritromicina             | Noretindrona     | Tiamina             |
| Bilirrubina            | Fenoprofeno              | Noscapina        | Tioridazina         |
| d,l-Bromfeniramina     | Furosemida               | d,l-Octopamina   | d,l-Tirosina        |
| Cannabidiol            | Ácido gentísico          | Ácido oxálico    | Tolbutamida         |
| Hidrato de cloral      | Hemoglobina              | Ácido oxolínico  | Triamtereno         |
| Cloranfenicol          | Hidralazina              | Oximetazolina    | Trifluoperazina     |
| Clorotiazida           | Hidroclorotiazida        | Penicilina-G     | Trimetoprima        |
| d,l-Clorfeniramina     | Hidrocortisona           | Perfenazina      | d,l-Triptófano      |
| Clorpromazina          | Ácido o-hidroxihipúrico  | Fenelzina        | Ácido úrico         |
| Colesterol             | 3-Hidroxitiramina        | Prednisona       | Verapamilo          |
| Clonidina              | d,l-Isoproterenol        |                  |                     |

【CARACTER STICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ALCOHOL】

El límite de detección en la **orina Prueba Rápida de Alcohol** es de 0.02% a 0.30% para el nivel de alcohol en la sangre relativa aproximada. El nivel de corte de la **orina Prueba Rápida de Alcohol** puede variar en función de normas y leyes locales. Los resultados del ensayo se pueden comparar con los niveles de referencia con la carta de color en el paquete de aluminio.

【ENSAYO DEL ALCOHOL ESPECIFICIDAD】

La **orina Prueba Rápida de Alcohol** reaccionará con metilo, etilo y alcoholes alílicos.

【SUSTANCIAS INTERFERIR CON EL ALCOHOL】

Las siguientes sustancias pueden interferir con la **orina Prueba Rápida de Alcohol** cuando no se usan muestras que no sean de orina. Las sustancias nombradas no aparecen normalmente en suficiente cantidad en la orina para interferir con el examen.

- A. Agentes que mejoran el desarrollo del color
  - Peroxidasas
  - Oxidantes fuertes
- B. Agentes que inhiben el desarrollo del color
  - Agentes reductores: ácido ascórbico, ácido tánico, pirogalol, mercaptanos y tosylates, ácido oxálico, ácido úrico
  - Bilirrubina
  - L-dopa
  - L-metildopa
  - Metampirona

【BIBLIOGRAFÍA】

1. Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. W.B. Saunders Company. 1986; 1735.  
2. B. Cody, J.T., "Specimen Adulteration in drug urinalysis. Forensic Sci. Rev., 1990, 2:63.  
3. C. Tsai, S.C. et.al., J. Anal. Toxicol. 1998; 22 (6): 474  
4. Hawks RL, CN Chiang. *Urine Testing for Drugs of Abuse*. National Institute for Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, 1986.  
5. Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 6th Ed. Biomedical Publ., Foster City, CA 2002.

| Índice de símbolos                                                                |                                                                             |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Consulte las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónicas   |  | Contiene suficiente para <n> pruebas |  | Fabricante      |
|  | Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>                           |  | Fecha de caducidad                   |  | No reutilizar   |
|  | Límite de temperatura                                                       |  | Código de lote                       |  | Catálogo Número |
|  | No lo utilice si el paquete está dañado y consulte las instrucciones de uso |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                 |

**Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.**  
#550, Yinhai Street  
Hangzhou Economic & Technological Development Area  
Hangzhou, 310018 P.R. China  
Web: [www.alltests.com.cn](http://www.alltests.com.cn) Email: [info@alltests.com.cn](mailto:info@alltests.com.cn)

Importado y Distribuido en México por  
Kabla Comercial, S.A. de C.V.  
Loma Blanca 2900  
Deportivo Obispedo  
Monterrey, N.L. 64040

Número: 14602524701  
Fecha de revisión: 2024-08-20